

Zubehörteile

VIELE EXTRAS FÜR DIE TÄGLICHE PRAXIS

Ein umfangreiches Zubehörprogramm vervollständigt - neben den Systemkomponenten - sämtliche, individuelle Ansprüche an den Gerätewagen. So sorgen u.a. spezielle Halterungen für die einwandfreie Aufnahme von Endoskopen, Gasflaschen oder Infusionen. Die Benutzung der höhenvariablen und schwenkbaren Tragarme sorgt für eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung und eine sichere Aufnahme der diversen Bildschirme. Körbe dienen zur Unterbringung kleinerer Materialien, Steckdosenleisten mit passenden Steckerauszugssperren dienen der sicheren Elektrifizierung. Dank unseres umfangreichen Programms kann nahezu jeder Ausstattungswunsch bereits im Standard erfüllt werden.



SCHWENKARME UND HÖHENVARIABLE TRAGARME

Die ITD GmbH bietet in ihrem umfangreichen Produktportfolio eine **große Auswahl an unterschiedlichsten Tragarmen** (starr, schwenkbar und höhenvariabel) an, die je nach Art und Anbindungsmöglichkeit an den einzelnen Gerätewagen-Typ montiert werden können. Dabei sind sämtliche Varianten **mit VESA 75 / 100 Adaptionen, Universaladapter oder Table Top Mount-Adapter** verfügbar, um jegliche Art von Monitoren problemlos aufzunehmen.

Einen ausführlichen Überblick zum gesamten Portfolio können Sie sich in dem separat erhältlichen Produkt-Katalog „**carry 'n' hold** – Stationäre Trägersysteme“ verschaffen.

Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Gerätewagen in Verbindung mit Tragarmen muss die Standsicherheit gemäß **EN60601-1** gegeben sein. Zur möglichen Verwendung von Gegengewichten beraten wir Sie gerne.



SCHWENK- UND TRAGARME – VARIANTEN

Schwenkarm **rm-port**

Die Schwenkarme der neuen Generation **rm-port** zeichnen sich durch eine außergewöhnlich zügige, benutzerfreundliche Installation und einen erhöhten Bedienkomfort für die Anwender aus. Großvolumige innenliegende Kabelkanäle sorgen für eine reibungslose Kabeldurchführung und neue Abdeckungen mit click & slide-Funktion dienen einer schnellen und sicheren Verriegelung von Kabeln im Kabelkanal. Für einen überdurchschnittlichen Bedienkomfort dieser Tragarme sorgen die bereits optimal eingestellten Drehmomente in den Gelenken, welche ein stufenloses horizontales Gleiten während der Positionierung der Arme gewährleisten. Die **rm-port** Schwenkarme sind in zwei Standardlängen oder als Doppelarme erhältlich.



Schwenkarm **rm-port**, 1-fach
verfügbare Auslegerlängen:
250 mm und 325 mm



Schwenkarm **rm-port**, 2-fach
verfügbare Auslegerlängen:
250 mm + 250 mm und 325 mm + 325mm

Höhenvariable Tragarme **flexion-port**

Der höhenvariable Tragarm **flexion-port** eignet sich perfekt für die Aufnahme diverser Monitore. Müheloses Anheben und Positionieren der Geräte wird mithilfe Gasdruckfedern erreicht. Während der Erstinstallation, wird **flexion-port** auf das Gewicht des montierbaren Gerätes eingestellt. Danach kann jede weitere Positionierung ohne Justierungsaufwand durchgeführt werden. Verfügbare Klemmen sorgen für sichere Fixierung der Gelenke während des Transports mobilen Anwendungen. **flexion-port** ist in drei Standardlängen (300, 400 und 600 mm) sowie in der Kombination mit einem zusätzlichen Schwenkarm (350 mm) verfügbar.



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**
auf Schwenkarm



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**
spezielle Anbringung an **pro-cart**

Spezielle Anbringung von **flexion-port** an **classic-cart** und **compact-cart**



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**




Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**
auf Schwenkarm

Monitortraverse, 1-fach



Monitorboden, 2-fach
ohne Schwenkarm

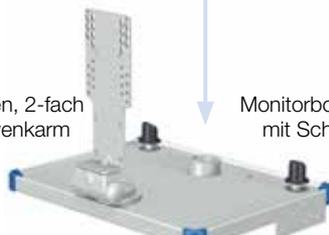

Monitorboden, 2-fach
mit Schwenkarm



SCHWENKARME rm-port

Schwenkarme rm-port mit VESA 75 / 100 Adaption

Der Schwenkarm **rm-port** (1-fach, 2-fach) ist mit einer Dreh- und Schwenkeinheit mit VESA 75 / 100 Adaption für eine besonders bedienerfreundliche Positionierung der Monitore ausgestattet. Innenliegende Kabelkanäle mit Zugentlastungen ermöglichen die Aufnahme diverser Kabel. Große Aktionsradien decken je nach Variante einen weitreichenden Arbeitsbereich ab. Die federunterstützte Monitorhalterung ist um $\pm 20^\circ$ neigbar, um $\pm 90^\circ$ schwenkbar und um $\pm 5^\circ$ rotierbar.

- Einbauhöhe:** 3 E (96 mm)
Tragfähigkeit: **Schwenkarm, 1-fach:** bis max. 23 kg; **Monitorgewicht** bis max. 18 kg
Schwenkarm, 2-fach: bis max. 18 kg; **Monitorgewicht** bis max. 18 kg
Material: Stahl / Aluminium
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: In den T-Nuten der Vertikalprofile oder auf der Tragsäule
Lieferumfang: 1 Schwenkarm, inklusive Montagematerial. Für Befestigung am **classic-cart**, **compact-cart** benötigen Sie einen separat erhältlichen Befestigungs-Set.



Schwenkarm, 1-fach **rm-port**



Schwenkarm, 2-fach **rm-port**

Schwenkarm, 1-fach	Produktlinie	Artikelnummer L = 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm
Monitorgewicht 0-14 kg	alle	TH.2170.991	TH.2171.991
Monitorgewicht 14-18 kg	alle	TH.2172.991	TH.2173.991
Befestigungs-Set	classic-cart, compact-cart		ZV.9731.999

Schwenkarm, 2-fach	Produktlinie	Artikelnummer L=250 mm + 250 mm	Artikelnummer L=325 mm + 325 mm
Monitorgewicht 0-14 kg	classic-cart, compact-cart	TH.2260.991	TH.2261.991
Monitorgewicht 14-18 kg	classic-cart, compact-cart	TH.2262.991	TH.2263.991
Befestigungs-Set	classic-cart, compact-cart		ZV.9731.999

HÖHENVARIABLE TRAGARME flexion-port

Höhenvariable Tragarme flexion-port mit VESA 75 / 100 Adaption

Beim höhenvariablen Tragarm **flexion-port** ermöglichen großvolumige, klickbare Kabelkanäle die Aufnahme diverser Kabel. Einstellbare Drehgelenke sowie eine Bremsfunktion sorgen für präzise Positionierung. Die Monitorhalterung ist um $\pm 20^\circ$ neigbar, um $\pm 90^\circ$ schwenkbar und um $\pm 5^\circ$ rotierbar. Die Neigung des Monitors lässt sich aufgrund der Federkraft-Unterstützung mit geringem Kraftaufwand vollziehen.

- Einbauhöhe:** 5 E (160 mm)
- Material:** Stahl / Aluminium
- Oberfläche:** RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
- Dekorelemente:** **flexion-port:** siehe ¹⁾
- Montage:** In den T-Nuten der Vertikalprofile oder an der Tragsäule
- Lieferumfang:** 1 Tragarm, inklusive Montagematerial. Für Befestigung am **classic-cart**, **compact-cart** benötigen Sie einen separat erhältlichen Befestigungs-Set.



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**

Höhenvariabler Tragarm **flexion-port** auf Schwenkarm

Höhenvariable Tragarme mit VESA 75 / 100 Adaption	Produktlinie	Zuladung	Artikelnummer
Länge 300 mm	alle	3-10 kg	HA.2200.XXX ¹⁾
	alle	8-14 kg	HA.2207.XXX ¹⁾
Länge 400 mm	alle	3-10 kg	HA.2201.XXX ¹⁾
	alle	8-14 kg	HA.2208.XXX ¹⁾
Länge 600 mm	classic-cart, compact-cart	3-10 kg	HA.2202.XXX ¹⁾
	classic-cart, compact-cart	8-14 kg	HA.2209.XXX ¹⁾
Befestigungs-Set	classic-cart, compact-cart		ZV.9731.999

Höhenvariable Tragarme auf Schwenkarm mit VESA 75 / 100 Adaption	Produktlinie	Zuladung	Artikelnummer
Länge 300 mm + 350 mm	classic-cart, compact-cart	3-10 kg	HA.2218.XXX ¹⁾
	classic-cart, compact-cart	8-14 kg	HA.2224.XXX ¹⁾
Länge 400 mm + 350 mm	classic-cart, compact-cart	3-10 kg	HA.2219.XXX ¹⁾
	classic-cart, compact-cart	8-14 kg	HA.2225.XXX ¹⁾
Befestigungs-Set	classic-cart, compact-cart		ZV.9731.999

HÖHENVARIABLE TRAGARME flexion-port

Höhenvariable Tragarme flexion-port mit VESA 75 / 100 Adaption für pro-cart

Beim höhenvariablen Tragarm **flexion-port** ermöglichen großvolumige, klickbare Kabelkanäle die Aufnahme diverser Kabel. Einstellbare Drehgelenke sowie eine Bremsfunktion sorgen für präzise Positionierung. Die Monitorhalterung ist um $\pm 20^\circ$ neigbar, um $\pm 90^\circ$ schwenkbar und um $\pm 5^\circ$ rotierbar. Die Neigung des Monitors lässt sich aufgrund der Federkraft-Unterstützung mit geringem Kraftaufwand vollziehen. Der Tragarm wird auf der Tragsäule des **pro-cart** montiert.

- Material:** Stahl / Aluminium
- Oberfläche:** RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
- Dekorelemente:** **flexion-port:** siehe ¹⁾
- Montage:** Auf der Tragsäule
- Lieferumfang:** 1 Tragarm, inklusive Montagematerial



Höhenvariable Tragarme mit VESA 75 / 100 Adaption auf Tragsäule	Produktlinie	Artikelnummer Länge 300 mm	Artikelnummer Länge 400 mm
Zuladung 3-10 kg	pro-cart	HA.2238.XXX ¹⁾	HA.2239.XXX ¹⁾
Zuladung 8-14 kg	pro-cart	HA.2240.XXX ¹⁾	HA.2241.XXX ¹⁾

Höhenvariable Tragarme flexion-port mit VESA 75 / 100 Adaption für classic-cart und compact-cart

Beim höhenvariablen Tragarm **flexion-port** ermöglichen großvolumige, klickbare Kabelkanäle die Aufnahme diverser Kabel. Einstellbare Drehgelenke sowie eine Bremsfunktion sorgen für präzise Positionierung. Die Monitorhalterung ist um $\pm 20^\circ$ neigbar, um $\pm 90^\circ$ schwenkbar und um $\pm 5^\circ$ rotierbar. Die Neigung des Monitors lässt sich aufgrund der Federkraft-Unterstützung mit geringem Kraftaufwand vollziehen. Der Tragarm wird auf der separat bestellbaren Monitortraverse bzw. am Monitorboden montiert.

- Material:** Stahl / Aluminium
- Oberfläche:** RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
- Dekorelemente:** **flexion-port:** siehe ¹⁾
- Montage:** Auf der Monitortraverse / am Monitorboden
- Lieferumfang:** 1 Tragarm, inklusive Montagematerial



Höhenvariable Tragarme mit VESA 75 / 100 Adaption auf Monitortraverse / Monitorboden	Produktlinie	Artikelnummer Länge 300 mm	Artikelnummer Länge 400 mm
Zuladung 3-10 kg	classic-cart, compact-cart	HA.2230.XXX ¹⁾	HA.2231.XXX ¹⁾
Zuladung 8-14 kg	classic-cart, compact-cart	HA.2232.XXX ¹⁾	HA.2233.XXX ¹⁾

¹⁾ Dekorelemente: ersetzen Sie .XXX durch .901 = RAL 5021 Wasserblau, .902 = RAL 5013 Kobaltblau, .903 = RAL 7035 Lichtgrau, .908 = RAL 5015 Himmelblau, .909 = RAL 1003 Signalgelb

HÖHENVARIABLE TRAGARME flexion-port

Höhenvariable Tragarme auf Schwenkarm mit VESA 75 / 100 Adaption für **classic-cart** und **compact-cart**

Beim höhenvariablen Tragarm **flexion-port** ermöglichen großvolumige, klickbare Kabelkanäle die Aufnahme diverser Kabel. Einstellbare Drehgelenke sowie eine Bremsfunktion sorgen für präzise Positionierung. Die Monitorhalterung ist um $\pm 20^\circ$ neigbar, um $\pm 90^\circ$ schwenkbar und um $\pm 5^\circ$ rotierbar. Die Neigung des Monitors lässt sich aufgrund der Federkraft-Unterstützung mit geringem Kraftaufwand vollziehen. Der Tragarm wird auf der separat bestellbaren Monitortraverse bzw. am Monitorboden montiert.

- Material:** Stahl / Aluminium
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Dekorelemente: **flexion-port:** siehe ¹⁾
Montage: Auf der Monitortraverse / am Monitorboden
Lieferumfang: 1 Tragarm, inklusive Montagematerial



Höhenvariable Tragarme mit VESA 75 / 100 Adaption auf Monitortraverse / Monitorboden	Produktlinie	Artikelnummer Länge 300 mm + 350 mm	Artikelnummer Länge 400 mm + 350 mm
Zuladung 3-10 kg	classic-cart, compact-cart	HA.2234.XXX ¹⁾	HA.2235.XXX ¹⁾
Zuladung 8-14 kg	classic-cart, compact-cart	HA.2236.XXX ¹⁾	HA.2237.XXX ¹⁾

MONITORTRAVERSE / -BODEN flexion-port

Monitortraverse, 1-fach für flexion-port

Die Monitortraverse wird zwischen den beiden Vertikalprofilen des Gerätewagens **classic-cart** „Profi“ (mit Energiesäulen) oder **compact-cart** „Profi“ montiert. Die höhenvariablen Tragarme **flexion-port** können direkt auf der Monitortraverse platziert werden.

- Einbauhöhe:** 2 E (64 mm)
- Tragfähigkeit:** Bis max. 14 kg
- Material:** Stahl
- Oberfläche:** RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
- Montage:** In den T-Nuten der Vertikalprofile
- Lieferumfang:** 1 Monitortraverse, inklusive Montagematerial



Monitortraverse, 1-fach	Artikelnummer B 450 mm	Artikelnummer B 500 mm	Artikelnummer B 600 mm	Artikelnummer B 650 mm
für classic-cart und compact-cart	HA.4511.991	HA.5011.991	HA.6011.991	HA.6511.991

Monitorboden, 2-fach für flexion-port

Der Monitorboden wird zwischen den beiden Vertikalprofilen des Gerätewagens **classic-cart** „Profi“ (mit Energiesäulen) oder **compact-cart** „Profi“ montiert. Der Monitorboden ist in zwei Varianten verfügbar: ohne oder mit installiertem Schwenkarm. Beide Varianten verfügen über Schnell-Entriegelung / Arretierung. An vorderster Position ist er zudem standardmäßig mit einer Universal-Monitorhalterung mit VESA 75 / 100 Adaption (um $\pm 15^\circ$ neigbar, $\pm 90^\circ$ schwenkbar) ausgestattet. Der Schwenkbereich der Tragarmhalterung beträgt 266° und bei der Variante mit Schwenkarm 180° .

- Einbauhöhe:** 2 E (64 mm)
- Tragfähigkeit:** **Ablageboden:** max. 30 kg Flächenlast
Monitorhalterung: max. 14 kg
- Material:** Stahl
- Oberfläche:** RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
- Dekorelemente:** **Ecken** siehe ¹⁾
- Montage:** In den T-Nuten der Vertikalprofile
- Lieferumfang:** 1 Monitorboden, inklusive Montagematerial



Monitorboden 2-fach für flexion-port	Artikelnummer B 450 mm	Artikelnummer B 500 mm	Artikelnummer B 600 mm	Artikelnummer B 650 mm
1 ohne Schwenkarm für classic-cart		GW.5099.XXX ¹⁾	GW.6099.XXX ¹⁾	
1 ohne Schwenkarm für compact-cart	CC.4573.XXX ¹⁾	CC.5073.XXX ¹⁾		CC.6573.XXX ¹⁾
2 mit Schwenkarm für classic-cart		GW.5098.XXX ¹⁾	GW.6098.XXX ¹⁾	
2 mit Schwenkarm für compact-cart	CC.4572.XXX ¹⁾	CC.5072.XXX ¹⁾		CC.6572.XXX ¹⁾

¹⁾ Dekorelemente: ersetzen Sie .XXX durch .901 = RAL 5021 Wasserblau, .902 = RAL 5013 Kobaltblau, .903 = RAL 7035 Lichtgrau, .908 = RAL 5015 Himmelblau, .909 = RAL 1003 Signalgelb

GRIFF / GEGENGEWICHTE-SETS flexion-port

Griff für Dreh- und Schwenkeinheit mit VESA 75 / 100 Adaption und Federkraftunterstützung

Der Griff ist speziell für die Dreh- und Schwenkeinheit mit VESA 75 / 100 Adaption und Federkraftunterstützung ausgelegt und kann auch jederzeit nachträglich montiert werden. Durch seine Höhenverstellbarkeit ist er für Monitore unterschiedlicher Größe ausgelegt und erlaubt eine bequeme Verstellung des bestückten Tragarms in die gewünschte Position.

Material:	Stahl
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage:	An der Dreh- und Schwenkeinheit mit VESA 75 / 100 Adaption
Lieferumfang:	1 Griff, inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinien	Artikelnummer
Griff für Dreh- und Schwenkeinheit mit VESA 75 / 100 Adaption	alle	TS.0808.991

Gegengewichte-Set

Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch von Tragarmen in Verbindung mit mobilen Geräteträgern muss die Standsicherheit gemäß EN60601-1 gegeben sein. Entsprechende Gegengewichte werden hierbei – je nach Gerätewagen – in den Frontauslegern, auf oder unterhalb der Basistraverse montiert.

Material:	Stahl
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Gegengewichte-Set inklusive Montagematerial, nur werkseitige Montage

Gegengewichte-Set	Montage	Gewicht	Artikelnummer
für uni-cart	unter dem Basisgestell	15 kg	RS.4391.991
	in den Frontauslegern	2 x 4 kg	RS.0344.999
für vexio-cart	unter den Frontauslegern	2 x 4 kg	NT.4140.800
für pro-cart	zwischen den Frontauslegern	15 kg	PT.2045.991
für classic-cart	auf der Basistraverse	16 kg	HA.2094.991
	unter der Basistraverse	13 kg	ZV.9742.999
für compact-cart	auf der Basistraverse	16 kg	HA.2093.991
	unter der Basistraverse	15 kg	ZV.9511.999

ABLAGEKÖRBE / KUNSTSTOFFBOX

Ablagekörbe

Zur Ablage von medizinischem Zubehör.

1 2 Ablagekorb, konisch. Abmessung: B 305 mm, T 205 mm, H 150 mm.

Tragfähigkeit: 3 kg
Material: Stahl
Oberfläche: RAL 9016 Weiß, wirbelgesintert
Montage: Bei **uni-cart** in den vorderen T-Nuten, sowie werkseitige Montage mit einem Adapterprofil an der Rückseite der Tragsäule, bei **vexio-cart** und **pro-cart** in den vorderen und hinteren T-Nuten der Tragsäule
Lieferumfang: 1 Ablagekorb inklusive Montagematerial

3 Ablagekorb, konisch, klein. Abmessung: B 205 mm, T 93 mm, H 150 mm.

Tragfähigkeit: 3 kg
Material: Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: Bei **uni-cart**, **vexio-cart**, **pro-cart** in den vorderen T-Nuten sowie werkseitige Montage am Schubfach; bei **vexio-cart** und **pro-cart** auch hinten an der Tragsäule
Lieferumfang: 1 Ablagekorb inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Einbauhöhe (1E = 32 mm)	Produktlinie	Artikelnummer
1 Ablagekorb, konisch	5 E (160 mm)	alle	ZV.9967.800
2 Ablagekorb, konisch, rückseitige Montage	5 E (160 mm)	uni-cart	ZV.9989.991
3 Ablagekorb, konisch, klein	5 E (160 mm)	alle	ZV.9892.991

Befestigungs-Set für Ablagekörbe

Zur Anbringung der Ablagekörbe: konisch **ZV.9967.800** und konisch, klein **ZV.9989.991** an den Vertikalprofilen der Gerätewagen **classic-cart** mit Energiesäulen und **compact-cart** „Profi“

Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Befestigungs-Set	classic-cart , compact-cart	ZV.9422.999

Kunststoffbox

Zur Ablage von medizinischem Zubehör.

Tragfähigkeit: 3 kg
Material: Kunststoff / Stahl
Oberfläche: Weiß / RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: In den vorderen und hinteren T-Nuten der Tragsäule
Lieferumfang: 1 Kunststoffbox mit Halterung inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Kunststoffbox	uni-cart , vexio-cart , pro-cart	ZV.9286.991

RECHNERHALTERUNGEN

Rechnerhalterung für Profillinenseite

Diese Halterung gewährleistet durch ihre individuelle Anpassbarkeit die Stand- und Transportsicherheit für Rechner mit Gehäusebreiten zwischen 50 und 225 mm.

- Material:** Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: Mit einer verstellbaren Halterung links oder rechts an der Profillinenseite von **classic-cart**, **compact-cart**
Lieferumfang: 1 Rechnerhalter inklusive Montagematerial, vormontiert




Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Rechnerhalterung	classic-cart, compact-cart	GW.0709.991


Rechnerhalterungen

Diese Halterungen sind für Rechner unterschiedlicher Größe ausgelegt und gewährleisten durch zwei Gurtbänder individuelle Anpassbarkeit sowie Stand- und Transportsicherheit.

- Material:** Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: Mit einer verstellbaren Halterung links oder rechts an der Profillinenseite von **classic-cart**, **compact-cart**; an der Profilaussenseite bei **classic-cart** ohne Energiesäulen oder bei **compact-cart** „Economy“
Lieferumfang: 1 Rechnerhalter inklusive Montagematerial, vormontiert

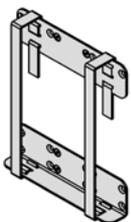

Rechnerhalterung,
klein

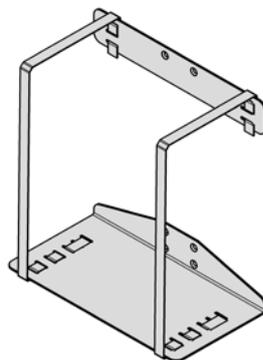

Rechnerhalterung,
groß



Bezeichnung	Tragfähigkeit	Produktlinie	Artikelnummer
Rechnerhalterung, klein	5 kg	alle	TS.6144.991
Rechnerhalterung, groß	20 kg	alle ¹⁾	TS.6146.991


¹⁾ Die Rechnerhalterung groß ist an der Außenseite des Vertikalprofils in Verbindung mit Energiesäulen nicht einsetzbar.

LAPTOPHALTERUNG

Laptophalterung mit Mousepad für uni-cart, vexio-cart und pro-cart

Die Laptophalterung wird direkt an der Tragsäule montiert und ist für die Aufnahme aller gängigen Modelle geeignet. Diese werden durch ein Klettband, Länge 935 mm und zwei, in der Höhe verstellbaren Halterungen arretiert. Das integrierte Mousepad kann sowohl nach rechts als auch nach links um 230 mm ausgezogen werden.

- Einbauhöhe:** 4 E (128 mm)
- Tragfähigkeit:** 10 kg Flächenlast
- Material:** **Laptophalterung:** Stahl / Aluminium; **Klettband:** Kunststoff
- Oberfläche:** RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
- Montage:** Direkt an der Tragsäule von **uni-cart, vexio-cart** und **pro-cart**
- Lieferumfang:** 1 Laptophalterung inklusive Montagematerial, vormontiert

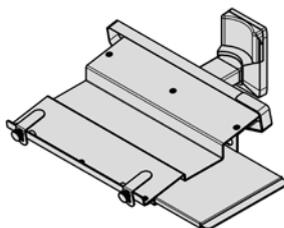

Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Laptophalterung mit Mousepad	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.6301.991

NETZTEILHALTERUNGEN

Netzteilhalterung universal

Die Halterung ist- je nach Modell - für die Aufnahme von Netzteilen mit einem maximalen Umfang von bis zu 420 mm ausgelegt. Sie kann sowohl rückseitig am Universal-Monitorwinkel mit VESA 75 / 100 Adaption als auch am Trägerprofil oder Vertikalprofil montiert werden.

- Einbauhöhe:** **klein:** 5 E (160 mm); **groß:** 7 E (224 mm)
- Tragfähigkeiten:** **klein:** bis max. 3 kg; **groß:** bis max. 5 kg
- Material:** Stahlblech
- Oberfläche:** RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
- Lieferumfang:** 1 Netzteilhalterung inklusive Montagematerial



Netzteilhalterung, klein



Netzteilhalterung, groß


Bezeichnung	max. Umfang	Produktlinie	Artikelnummer
Netzteilhalterung universal, klein	250 mm	alle	TS.0524.991
Netzteilhalterung universal, groß	420 mm	alle	TS.0574.991

ADAPTERPLATTEN

Adapterplatten für Universaladapter

Adapterplatten werden zur Anbringung der Monitore über einen Universaladapter benötigt. Die herstellerspezifischen Adapterplatten werden erst mit dem jeweiligen Monitor verschraubt. Die Sicherung erfolgt mittels Rastbolzen auf der befestigten Monitorhalterung.

Material: Aluminium
Zuladung: Bis max. 14 kg
Oberfläche: Eloxiert
Lieferumfang: 1 Adapterplatte inklusive Montagematerial

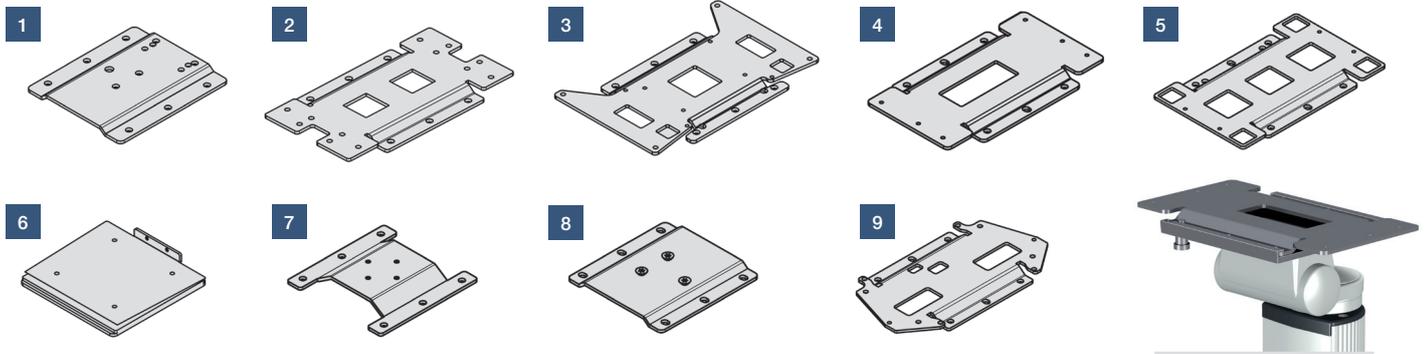


Adapterplatten für Universaladapter für	Produktlinie	Artikelnummer
1 GE Critikon Pro 100 / Dash / Datex Ohmeda	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.0305.999
2 Mindray BeneView T5 / T8 / PM-9000	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.0657.999
3 Nihon Kohden Life Scope L / TR / PVM	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.0576.999
4 Nihon Kohden Life Scope VS / BSM	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.0670.999
5 Nihon Kohden SVM 7501 / 7503 / 7521 / 7523	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.0892.999
6 Schiller Argus LCM / LCX	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.0360.999
7 Philips Efficia CM 100/120/150	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.0469.999
8 Philips Slide In für IntelliVue MX 400-800	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.0822.999
9 Fukuda Denshi DS-7000 / 7100 / 7200 / 8100 / 8200	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.0865.999

Weitere Adapterplatten auf Anfrage

Adapterplatten für VESA 75 / 100

Adapterplatten werden zur Anbringung der Monitore über eine VESA 75 / 100 Adaption benötigt. Die herstellerspezifischen Adapterplatten werden mit der VESA 75 / 100 Adaption verschraubt. Die Sicherung erfolgt mittels Rastbolzen auf der befestigten Monitorhalterung.

Material: Aluminium
Zuladung: Bis max. 14 kg
Oberfläche: Eloxiert
Lieferumfang: 1 Adapterplatte inklusive Montagematerial

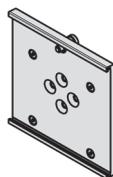

Adapterplatte für VESA 75 / 100 für	Produktlinie	Artikelnummer
Spacelabs SL 2600	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	TS.0824.999

Weitere Adapterplatten auf Anfrage

ENDOSKOPHALTERUNGEN

Endoskophalterung, einfach bzw. doppelt

Die Endoskophalterungen dienen der sicheren und knickfreien Aufnahme von Endoskopen aller gängigen Fabrikate. Aufgrund der Höhenverstellbarkeit können dabei Endoskope von bis zu 2 m Länge aufgenommen werden. Die zusätzliche Halterung an der Teleskopstange ist in der Höhe einstellbar und dient als Fixierung und Schutz.

Material: **Auflage:** Kunststoff Polypylen; **Halterung:** Kunststoff Polypropylen glasfaserverstärkt;
Teleskopstange: Stahl verchromt
Montage: In der Tragsäule; im Vertikalprofil; an zwei Ablageböden bzw. an zwei Normschienen
Lieferumfang: 1 Endoskophalterung inklusive Montagematerial



Endoskophalterung, einfach	Produktlinie	Artikelnummer
im Vertikalprofil	classic-cart, compact-cart	GW.0867.991
in der Tragsäule	uni-cart	RS.0119.991
in der Tragsäule	pro-cart	PT.2047.991
an Ablageböden	uni-cart, classic-cart, compact-cart	GW.0868.991
an Ablageböden	pro-cart	PT.2046.991
an Normschienen	uni-cart, pro-cart, classic-cart, compact-cart	GW.0868.991

Endoskophalterung, doppelt	Produktlinie	Artikelnummer
im Vertikalprofil	classic-cart, compact-cart	GW.0869.991
an Ablageböden oder an Normschienen	uni-cart, classic-cart, compact-cart	GW.0870.991

ABTROPFBECHER

Abtropfbecher

Der Abtropfbecher mit einem max. Inhalt von 600 ml kann problemlos am Vertikalprofil oder an der Tragsäule der Gerätewagen angebracht werden. Der höhenverstellbare Abtropfbecher kann an der Teleskopstange der Endoskophalterung befestigt werden.

Material: **Abtropfbecher:** Kunststoff Polypropylen, bis 135°C temperaturbeständig; **Halterung:** Stahl
Oberfläche: **Abtropfbecher:** transparent milchig; **Halterung:** RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: In den äußeren T-Nuten der Vertikalprofile oder an der Tragsäule; mittels Befestigungsklotz direkt an der Teleskopstange der Endoskophalterung
Lieferumfang: 1 Abtropfbecher inklusive Befestigung und Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
1 Abtropfbecher am Vertikalprofil bzw. Tragsäule	uni-cart, pro-cart, classic-cart, compact-cart	ZV.9963.999
2 Abtropfbecher an Teleskopstange	uni-cart, pro-cart, classic-cart, compact-cart	ZV.9986.999

STECKERHALTERUNG

Steckerhalterung

Die Steckerhalterung ermöglicht die sichere Aufnahme von bis zu drei Endoskopsteckern.

Material: Kunststoff
Montage: Am Vertikalprofil
Lieferumfang: 1 Steckerhalterung inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Steckerhalterung	uni-cart, pro-cart, classic-cart, compact-cart	ZV.9833.999

SPÜLFLASCHENHALTERUNG

Spülflaschenhalterung

Zur Aufnahme einer Spülflasche kann eine entsprechende Halterung seitlich am Ablageboden befestigt werden.

- Tragfähigkeit:** 5 kg
Material: Edelstahl
Montage: Am Ablageboden
Lieferumfang: 1 Spülflaschenhalterung inklusive Montagematerial, nur werkseitige Montage



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Spülflaschenhalterung	uni-cart, classic-cart, compact-cart	GW.9805.999
Spülflaschenhalterung	vexio-cart, pro-cart	PT.2007.999

SCHLAUCHHALTERUNG

Schlauchhalterung

Die Halterung kann Schläuche – z. B. von Absaugpumpen – mit einem Durchmesser von 6 mm bis 14 mm aufnehmen.

- Material:** Edelstahl
Montage: Am Ablageboden
Lieferumfang: 1 Schlauchhalterung inklusive Montagematerial, nur werkseitige Montage



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Schlauchhalterung	uni-cart, classic-cart, compact-cart	GW.9882.999

KAMERAHALTERUNGEN

Kamerahalterungen

Die Kamerahalterung dient zur Aufnahme des Kamerakopfes horizontal oder vertikal am Okulartrichter. Sie kann sowohl seitlich als auch unterhalb des Ablagebodens angebracht werden. Die Kamerahalterung mit Klemmbügel ist so konzipiert, dass sie am Ablageboden verschoben werden kann. Der Kamerakopf wird dabei vertikal befestigt. Der Bügel dient als Kabelhalterung.

- Material:** **Kamerahalterung:** Kunststoff Polyamid schwarz; **Klemmhalter:** Stahl / Aluminium,
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: Unterhalb bzw. seitlich am Ablageboden
Lieferumfang: 1 Kamerahalterung inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
1 Kamerahalterung	uni-cart, classic-cart, compact-cart	GW.9990.999
2 Kamerahalterung mit Klemmbügel	uni-cart, pro-cart, classic-cart, compact-cart	GW.9983.991

BARCODESCANNER HALTERUNG

Barcodescanner Halterung

Barcodescanner Halterung für konisch zulaufende Barcodescanner Köpfe mit einer Kopfbreite von 6-8 cm.

- Tragfähigkeit:** 0.5 kg
Material: Kunststoff / Stahl
Oberfläche: anthrazit / RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: in den vorderen und hinteren T-Nuten der Tragsäule
Lieferumfang: 1 Barcodescanner Halterung inkl. Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Barcodescanner Halterung	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	ZV.9287.991

GELFLASCHENHALTERUNG

Gelflaschenhalterung

Diese Halterung ist für Gelflaschen mit bis zu Ø 60 mm geeignet.

- Material:** Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: Am Ablageboden oder Schubfach; beim **vexio-cart** auch seitlich an der Tragsäule
Lieferumfang: 1 Gelflaschenhalterung inklusive Montagematerial, am Ablageboden oder Schubfach nur werkseitige Montage



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Gelflaschenhalterung	alle	GW.0800.991

FLASCHENHALTERUNG

Flaschenhalterung

Diese Halterungen dienen zur Aufnahme von Flaschen unterschiedlicher Größe. Sie sind zur Aufnahme einer 1 L Spülflasche (Ø 120 mm) oder eines 2 L Sekretglases (Ø 145 mm) geeignet.

- Tragfähigkeit:** 5 kg
Material: Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: seitlich am Vertikalprofil
Lieferumfang: 1 Flaschenhalterung inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Flaschenhalterung Ø 120 mm	alle	GW.0400.991
Flaschenhalterung Ø 145 mm	alle	GW.0401.991

Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Gerätewagen in Verbindung mit Flaschenhalterungen muss die Stand-sicherheit gemäß **EN60601-1** gegeben sein. Zur möglichen Verwendung von Gegengewichten beraten wir Sie gerne.

GASFLASCHENHALTERUNG

Gasflaschenhalterung

Die Gasflaschenhalterung kann in beliebiger Höhe bzw. im Raster von 32 mm entlang des Vertikalprofils oder der Tragsäule montiert werden.

- Material:** Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: An der Vorderseite der Tragsäule von **vexio-cart**, **uni-cart** und **pro-cart** bzw. an der Rückseite der Tragsäule von **vexio-cart** und **pro-cart** bzw. seitlich am Vertikalprofil beim **classic-cart** und **compact-cart**
Lieferumfang: 1 Gasflaschenhalterung inklusive Montagematerial, vormontiert



Gasflaschenhalterung für	Inhalt in Liter	Tragfähigkeit	Produktlinie	Artikelnummer
1 max. Ø 100 mm	2 L	15 kg	alle	GW.0466.991
2 max. Ø 145 mm	3 L / 5 L / 10 L	20 kg	alle	GW.0160.991
3 max. Ø 175 mm	10 L / 20 L	20 kg	alle	GW.0890.991
4 max. Ø 205 mm	20 L	50 kg	alle	GW.0285.991

Gasflaschenhalterung mit Adapterplatte für die Montage an der Rückseite der Tragsäule des uni-carts

Die Gasflaschenhalterung kann in beliebiger Höhe an die Rückseite der Tragsäule des **uni-carts** montiert werden.

- Material:** Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: An der Rückseite der Tragsäule von **uni-cart**
Lieferumfang: 1 Gasflaschenhalterung inklusive Montagematerial, nur werkseitige Montage



Gasflaschenhalterung für	Inhalt (Liter)	Tragfähigkeit	Produktlinie	Artikelnummer
1 max. Ø 100 mm	2 L	15 kg	uni-cart	RS.0110.991
2 max. Ø 145 mm	3 L / 5 L / 10 L	20 kg	uni-cart	RS.0111.991

Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Gerätewagen in Verbindung mit Gasflaschenhalterungen muss die Standicherheit gemäß **EN60601-1** gegeben sein. Zur möglichen Verwendung von Gegengewichten beraten wir Sie gerne. Bei Gasflaschenhalterungen ab 5 L empfehlen wir die Montage an der untersten Position des Vertikalprofils bzw. der Tragsäule

INFUSIONSSTATIV

Infusionsstativ

Das Infusionsstativ ist mit einem 4-armigem Sicherheits-Flaschenhalter ausgestattet und kann um 870 mm in der Höhe verstellt werden.

Material: Stahl

Montage: In der Tragsäule bzw. am Vertikalprofil

Lieferumfang: 1 Infusionsstativ inklusive Montagematerial, passende Abdeckkappe

Ausnahme: **pro-cart**, die im Basisgestell enthaltene Kappe kann ausgebrochen werden



Bezeichnung	Tragfähigkeit	Produktlinie	Artikelnummer
1 Infusionsstativ mit Einhandverstellung	4 x 2 kg	uni-cart	ZV.9881.800
2 Infusionsstativ mit Einhandverstellung	4 x 2 kg	vexio-cart	NT.4135.800
3 Infusionsstativ mit Einhandverstellung	4 x 2 kg	pro-cart	PT.2006.800
4 Infusionsstativ mit Einhandverstellung	4 x 2 kg	classic-cart, compact-cart	ZV.9882.800
5 Infusionsstativ	4 x 5 kg	classic-cart, compact-cart	ZV.9464.800

NORMSCHIENEN

Normschiene

Die Normschiene kann frontseitig an der Tragsäule oder seitlich am Vertikalprofil montiert werden.

Einbauhöhe: 1 E (32 mm)

Abmessung: T 10 mm x H 25 mm

Tragfähigkeit: 10 kg

Material: Edelstahl

Lieferumfang: 1 Normschiene mit Adapter inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Länge	Produktlinie	Artikelnummer
1 Normschiene	162 mm	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	RS.0132.991
2 Normschiene	390 mm	uni-cart, vexio-cart, pro-cart	RS.0076.991
3 Normschiene	390 mm	classic-cart, compact-cart	GW.9801.991

HALTEKLAUEN / KLEMMEN / SCHIENENBEFESTIGUNGEN

Halteklau starr bzw. drehbar

Die Halteklau dient zur Aufnahme von medizinischen Geraten an Normschiene sowie an Rundrohren mit einem Durchmesser von max. \varnothing 38 mm. Mittels der drehbaren Variante kann schnell zwischen vertikaler und horizontaler Ausrichtung gewechselt werden.

Tragfahigkeit: 5 kg
Material: Halteklau: Aluminium; Adapterplatte: Stahl
Oberflache: Halteklau: Eloxiert; Adapterplatte: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: An der Normschiene oder am vertikalen Rundrohr
Lieferumfang: 1 Halteklau



starr


drehbar

Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
1 Halteklau, starr	alle	ZV.9820.799
2 Halteklau, drehbar mit Adapterplatte	alle	TS.6286.991

Klemmen

Die Klemmen sind zur Aufnahme von Zubehorteilen mit Zapfendurchmessern \varnothing 16 mm oder \varnothing 18 mm geeignet. Die Klemmen sind bei Ablageboden mit seitlichen Griffen nicht einsetzbar.

Material: Aluminium
Oberflache: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: An Normschiene bzw. am Ablageboden
Lieferumfang: 1 Klemme

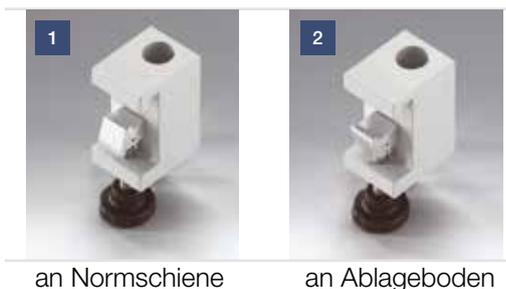

an Normschiene

an Ablageboden


Bezeichnung	Produktlinie	Aufnahme \varnothing 16 mm	Aufnahme \varnothing 18 mm
1 Klemme an Normschiene	alle	ZV.9876.999	ZV.9877.999
2 Klemme am Ablageboden	alle	ZV.9878.999	ZV.9879.999

Schienebefestigung

Die Schienebefestigung dient zur Anbringung von Zubehorteilen in verschiedenen Positionen an Ablageboden bzw. Normschiene.

- 1 Paarweise Verwendung zur variablen Befestigung von Infusionsstativen oder Endoskophalterungen an zwei Ablageboden.
- 2 Verwendung in Kombination mit 1, wenn ein Abtropfbecher angeschraubt werden soll.

Material: Aluminium
Oberflache: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: An Normschiene und am Ablageboden
Lieferumfang: 1 Schienebefestigung

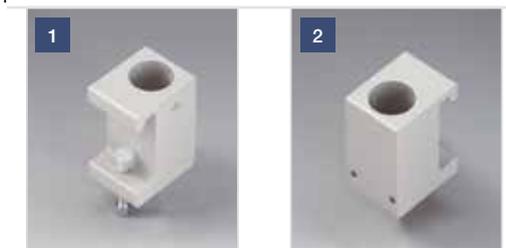

1

2

Bezeichnung	Produktlinie	Aufnahme \varnothing 25 mm
1 Schienebefestigung	uni-cart, classic-cart, compact-cart	ZV.9957.999
2 Schienebefestigung fur Abtropfbecher	uni-cart, classic-cart, compact-cart	ZV.9958.999

HALTER FÜR SAUGANLAGEN / ADAPTERSTÜCKE

Halter für Sauganlagen

Zur professionellen Aufnahme von Sauganlagen stehen entsprechende Halterungen in unterschiedlichen Ausführungen zur Verfügung.

Material: Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 1 Halterung inklusive Montagematerial, ggf. mit Abdeckkappe; für das **uni-cart** mit zusätzlich 2 Gegengewichten für das Basisgestell



Bezeichnung	Einbauhöhe	Ergoline / Strässle Ø 25,5 mm	Hellige / KISS Ø 30 mm	custo med Ø 25 mm
1 Halter für Sauganlagen für uni-cart	4 E (128 mm)	RS.0318.991		RS.0398.991
2 Halter für Sauganlagen für vexio-cart		NT.4125.991	NT.4126.991	NT.4138.991
3 Halter für Sauganlagen für pro-cart		PT.2009.991	PT.2010.991	PT.2019.991
4 Halter für Sauganlagen für classic-cart, compact-cart	3 E (96 mm)	GW.0570.991	GW.0702.991	GW.0579.991
5 Halter für Sauganlagen für classic-cart	2 E (64 mm)	GW.0717.991		

Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Gerätewagen in Verbindung mit Sauganlagenhalterungen muss die Standsicherheit gemäß **EN60601-1** gegeben sein. Zur hierfür möglichen Verwendung von Gegengewichten beraten wir Sie gerne.

Adapterstücke

Die Adapterstücke dienen zur Aufnahme von Anbauteilen und haben – je nach Modell und Gerätewagen – einen inneren Zapfendurchmesser von 13 mm, 16 mm oder 18 mm.

Material: für **uni-cart**: Stahl verzinkt; für **vexio-cart** und **pro-cart**: Aluminium / Kunststoff ABS;
 für **classic-cart** und **compact-cart**: Edelstahl
Lieferumfang: 1 Adapterstück inklusive Montagematerial, Abdeckkappe außer bei **pro-cart**



Bezeichnung	Ø Außen	Ø Innen 13 mm	Ø Innen 16 mm	Ø Innen 18 mm
1 Adapterstück für uni-cart	40 mm		ZV.9830.999	ZV.9831.999
2 Adapterstück für vexio-cart	24 mm		NT.4136.991	NT.4137.991
3 Adapterstück für pro-cart	40 mm		PT.2024.991	PT.2025.991
4 Adapterstück für classic-cart, compact-cart	25 mm	ZV.9901.999	ZV.9952.999	ZV.9953.999

FUSSSCHALTER-AUFHÄNGUNG

Fußschalter-Aufhängung

Die Aufhängung wird am Vertikalprofil oder an der Tragsäule befestigt und dient zur sicheren Aufnahme eines Fußschalters.

Material: Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 1 Fußschalter-Aufhängung inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Fußschalter-Aufhängung	alle	ZV.9991.991

GELENKARME

Gelenkarme

Die Gelenkarme können zur Aufnahme von Kleingeräten verwendet werden und sind sowohl mit als auch ohne Schlauchklemmen verfügbar. Je nach Befestigungsart muss ein Adapterstück oder eine Klemme mitbestellt werden.

1 Gelenkarm mit Schlauchklemmen. Gelenkklemmung mit Drehgriffen.
Ausladung max.: ca. 900 mm
Tragfähigkeit: 1 kg
Material: Aluminium
Oberfläche: Mattverchromt, natureloxiert
Lieferumfang: 1 Gelenkarm inklusive Montagematerial

2 Gelenkarm mit zwei Drehgelenken, drehbar um ca. 230°, stufenweise einstellbar durch Schnellverschlussknöpfe
Ausladung max.: ca. 890 mm
Tragfähigkeit: 1 kg
Material: Edelstahl / Kunststoff
Oberfläche: Poliert
Lieferumfang: 1 Gelenkarm inklusive Montagematerial




Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
1 Gelenkarm mit Schlauchklemmen, Zapfen Ø 16 mm	alle	ZV.9955.799
2 Gelenkarm für Kleingeräte, Zapfen Ø 18 mm	alle	ZV.9680.999

KABELAUFWICKELHILFEN

Kabelaufwickelhilfen

Die Kabelaufwickelhilfen werden u. a. an der Tragsäule oder am Vertikalprofil des Gerätewagens befestigt und können Kabel mit einer Länge von bis zu 5 m aufnehmen. Werkseitige Montage auf Anfrage möglich.

Material:	Kunststoff
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau
Montage:	An der Rückseite der Tragsäule von uni-cart , vexio-cart und pro-cart ; An Vertikalprofilen von classic-cart , compact-cart
Lieferumfang:	2 Kabelaufwickelhilfen inklusive Montagematerial, nur werkseitige Montage bei uni-cart 2 Kabelaufwickelhilfen inklusive Montagematerial und Abdeckleiste bei pro-cart 2 Kabelaufwickelhilfen inklusive Montagematerial bei vexio-cart , classic-cart , compact-cart

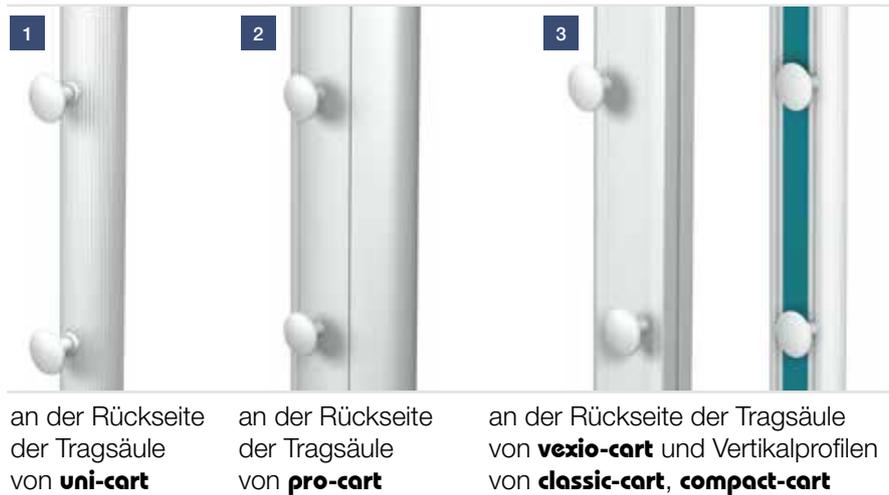

Kabelaufwickelhilfen	Einbauhöhe	Artikelnummer
1 für uni-cart	10 E (320 mm)	RS.0267.991
2 für pro-cart	19 E (608 mm)	PT.2004.991
3 für vexio-cart , classic-cart , compact-cart		FC.0253.991

KABELHALTERUNG

Kabelhalterung

Die Kabelhalterung dient der sicheren und schonenden Aufnahme von z.B. Lichtwellenleitern oder Glasfaserkabeln. Der große Durchmesser Ø 130 mm der Trommel verhindert das Knicken der empfindlichen Leiter.

Material:	Stahl / Kunststoff
Oberfläche:	Weiß bzw. RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Kabelhalterung inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Kabelhalterung	classic-cart , compact-cart	GW.9807.991

KABEL

Netzkabel

Für die Kaltgeräte-Steckdosenleisten bzw. die Kaltgeräte-Kabelbaum stehen verschiedenen Netzkabel mit und ohne POAG-Leitung zur Verfügung.

Kaltgerätebuchse: IEC 320
Länge: 5 m
Lieferumfang: 1 Netzkabel



Bezeichnung	Netzstecker	Nennstrom / Nennspannung	Produktlinie	Artikelnummer
1 Netzkabel Schuko	CEE7 / VII	10 A / 250 VAC	alle	ZV.9809.799
2 Netzkabel Schuko mit POAG	CEE7 / VII	10 A / 250 VAC	alle	ZV.9620.999
3 Netzkabel Schweizer Standard	Typ 12	10 A / 250 VAC	alle	ZV.9798.799
4 Netzkabel Britischer Standard	Typ BS 1363	10 A / 250 VAC	alle	ZV.9860.799
5 Netzkabel US Standard	3-polig US	15 A / 125 VAC	alle	ZV.9770.799

Kaltgerätekabel

Das Kaltgerätekabel dient zur Verbindung von Kaltgeräte-Steckdosenleiste und Kaltgerätestecker des Gerätes.

Aufbau: IEC-Kaltgerätedose --> IEC-Kaltgerätestecker
Lieferumfang: 1 Kaltgerätekabel



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Kaltgerätekabel, Länge 0,6 m	alle	ZV.9773.799
Kaltgerätekabel, Länge 1 m	alle	ZV.9960.799
Kaltgerätekabel, Länge 1,5 m	alle	ZV.9371.799
Kaltgerätekabel, Länge 2 m	alle	ZV.9372.799
Kaltgerätekabel, Länge 2,5 m	alle	ZV.9373.799

Adapterkabel

Adapterkabel mit Kaltgerätestecker und Schuko-Dose.

Aufbau: Schuko-Dose --> Kaltgerätestecker
Lieferumfang: 1 Adapterkabel



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Adapterkabel, Länge 0,3 m	alle	ZV.9959.799

POTENTIALAUSGLEICH

Potentialausgleichs-Stecker POAG-S6 DIN 42801

Fachpersonal und Patienten sind durch unkontrolliert auftretende Ableitströme gefährdet. Ursache sind Potentialdifferenzen zwischen elektrischen Betriebsmitteln und fremden, leitfähigen Teilen in medizinisch genutzten Räumen. Die sicherste Lösung ist die Installation eines Potentialausgleichs.

- Material:** Stahl / Messing vernickelt
Lieferumfang: 1x (4x, 6x, 8x oder 9x) Stecker POAG-S6 DIN 42801
 1x (4x, 6x, 8x oder 9x) Farbmarkierungsscheibe gelb / grün
 1 x Befestigungswinkel mit Montagematerial



Bezeichnung	Einbauhöhe	Produktlinie	Artikelnummer
1 POAG-Stecker		classic-cart, compact-cart	ZV.9940.999
2 Platte mit 4 POAG-Steckern	2 E (64 mm)	uni-cart, vexio-cart	RS.0125.991
3 Platte mit 6 POAG-Steckern		pro-cart	PT.0197.999
4 Platte mit 8 POAG-Steckern		classic-cart, compact-cart	CC.0276.999
5 Platte mit 9 POAG-Steckern	5 E (160 mm)	classic-cart	ZV.9802.999

Potentialausgleichs-Leitung POAG

Die Potentialausgleichs-Leitung POAG dient zur Verbindung von installierten Geräten mit dem Potentialausgleichs-Stecker.

- Material:** POAG-Buchse: Messing vernickelt
 Kabel: Kupfer
Lieferumfang: 1 Kabel mit Winkelbuchse beidseitig



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Potentialausgleichs-Leitung POAG, Länge 0,3 m	alle	ZV.9941.999
Potentialausgleichs-Leitung POAG, Länge 0,5 m	alle	ZV.9942.999
Potentialausgleichs-Leitung POAG, Länge 1 m	alle	ZV.9943.999
Potentialausgleichs-Leitung POAG, Länge 1,5 m	alle	ZV.9488.999
Potentialausgleichs-Leitung POAG, Länge 5 m	alle	ZV.9944.999

STECKDOSENLEISTEN-BEFESTIGUNG

Steckdosenleisten-Befestigung

Die Steckdosenleistenbefestigung wird rückseitig am Vertikalprofil montiert. Passend für alle Steckdosenleisten für **classic-cart** und **compact-cart** „Economy“.

Material: Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Montage: Rückseitig am Vertikalprofil
Lieferumfang: 1 Steckdosenleistenbefestigung inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Steckdosenleisten-Befestigung	classic-cart, compact-cart	FC.0302.991

Steckdosenleisten-Befestigung mit Kabelaufwickelhilfe

Die Steckdosenleistenbefestigung wird rückseitig am Ablageboden oder Ablageboden flach angebracht. Überschüssiges Kabel mit bis zu 5 m Länge kann auf der Kabelaufwickelhilfe platzsparend aufgenommen werden. Passend für die folgende Steckdosenleisten: Kaltgeräte (6-fach), Schuko (3-fach mit Schalter), Schweiz (3-fach mit Schalter).

Material: Stahl / Kunststoff
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 1 Steckdosenleistenbefestigung inklusive Montagematerial



Steckdosenleisten-Befestigung mit Kabelaufwickelhilfe	Produktlinie	Artikelnummer
für 450 mm Breite	classic-cart, compact-cart	GW.0681.991
für 500 mm, 600 mm und 650 mm Breite	classic-cart, compact-cart	GW.0631.991

STECKERAUSZUGSSPERRE

Steckerauszugssperre

Die Steckerauszugssperre verhindert das Herausziehen der Stecker aus der Steckdosenleiste sowie das Einstecken von Fremdgeräten.

Material: Stahl
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 1 Steckerauszugssperre inklusive Montagematerial




Bezeichnung	Einbauhöhe	Montage	Produktlinie	Artikelnummer
1 Steckerauszugssperre für Steckdosenleiste Schuko, 3-fach, mit Schalter	10 E (320 mm)	in den T-Nuten der Tragsäule	uni-cart, vexio-cart	GW.0632.991
2 Steckerauszugssperre für Steckdosenleiste Schuko, 3- / 6- / 8-fach mit Schalter		Innen am Vertikalprofil	classic-cart	GW.0633.991

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Federmuttern M6

Die Federmuttern können an beliebiger Stelle in die T-Nuten eingeklipst werden und dienen zur Befestigung von Systemkomponenten und Zubehörteilen.

Material: Stahl / Nirosta 4310
Oberfläche: verzinkt
Lieferumfang: 50 Stück

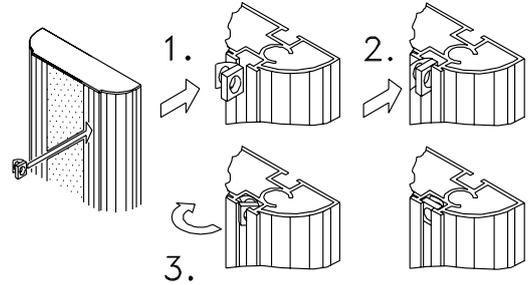

Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Federmuttern M6	alle	ZV.9851.999

FIXIERUNGSECKEN

Fixierungsecken

Diese selbstklebenden bzw. anschraubbaren Fixierungsecken sichern aufgestellte Geräte gegen Verrutschen und können am Ablageboden, Universalboden, Schubfachblock oder an der Basis angebracht werden. Aufgrund ihrer Bauweise passen sie auch unter Geräte mit sehr flachen Füßen – wie z. B. Druckern.

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 4 Fixierungsecken inklusive Montagematerial



Bezeichnung	Produktlinie	Artikelnummer
Fixierungsecken	alle	FC.0221.991