



BEHANDLUNGSESEL
MIT SEITENGITTERN

IHR FACHBERATER:



RAMMERSTORFER
MEDIZIN- UND PFLEGETECHNIK

BEHANDLUNGS- SESSEL MIT SEITENGITTERN



acime |
■■■■■■ Vorsprung durch Design

Ambu Packot Line

AMBULANTER BEHANDLUNGSSESSEL

Direktive
93/42/CEE | CE



■ WENDIG WIE EINE TRANSPORTLIEGE - AUSGERICHTET AUFS PATIENTENWOHL! ■



Herunterklappbare
Seitengitter,
teleskopisch

Komfortables
Kissen



Glattes Schutzgehäuse,
antibakteriell
vorbehandelt



Halterung für
Zubehör
(Infusionsständer,
Tablett)
(optional)



UNSERE
KISSEN-
FARBEN

STAMSKIN

In vielerlei Hinsicht an den Patientenkomfort, die Mobilität beim Transfer sowie die ambulante Chirurgie anpassbar!



ERGONOMIE

Matratze mit Stretchgewebe, 10 cm stark, auf freischwingernder Sitzfläche.



PATIENTENKOMFORT

Zusammenhängende Matratze, abnehmbar und einfach zu reinigen.



HYGIENE

Herunterklappbare Führungsgriffe, Akku und für den Transfer optimierte Seitengitter (optional).



WENDIGKEIT

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite (Basis: 60 cm): 80 cm
Gesamtlänge: 208,5 cm

Höhenverstellbar von 57 cm bis 97,5 cm
Breite der Sitzfläche: 60 cm oder 70 cm

Trendelenburg-Bewegung: 15°
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 85°
Beinauflage verstellbar von 0° bis 40°

Räder: Ø 15 cm, mit Zentralbremsung

Stärke der Polsterung: 10 cm

Höchstbelastung: 200 kg

STANDARD

Grundgestell aus Stahl - weiße Epoxid-Kunstharzbeschichtung
4 Räder, mit Zentralbremsung
2 herunterklappbare Seitengitter, teleskopisch
Elektrische Funktionen: Rückenlehne, Beinauflage, Höhenverstellung, Trendelenburg-Bewegung, mit Kabelfernbedienung
Führungsgriffe, fußseitig
Rechteckiges Kopfkissen
Matratze aus Polyurethan

Bequeme Neigungseinstellung oder Schocklage



OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- Armauflagen aus Polyurethan, mit Kugelgelenk
- Geschützte Führungsgriffe, klappbar, fußseitig
- 5. Rad/Führungsrad
- Seitengitter, für Transfers optimiert
- Akku
- Sicherheitsgürtel
- Eine andere Farbe als die Standardfarbe
- Halbmondförmiges Kopfkissen
- Feststellschraube Ø 16 mm (pro Stück)
- Schlauch für die Fernbedienung
- LED-Leselampe, beweglich
- Bremspedale, vorn
- Esstablrett 60 cm x 40 cm, mit Halterung
- Papierrollenhalterung
- Plastikschutz für die Beinauflage
- Universalschienen 25 mm x 10 mm (paarweise)
- Besonders komfortable Polsterung
- Halterung für Accessoires (Infusionsständer, Tablett)
- Infusionsständer, teleskopisch
- Abnehmbarer Hubzylinder



Ambu Fusion +

AMBULANTER BEHANDLUNGSSESSEL



■ PATIENTENTRANSFER, AMBULANTE PFLEGE USW. - ANPASSUNG AN IHRE BEDÜRFNISSE! ■

Full Washable System®



Führungsgriffe,
kopf- und fußseitig



Zentralbremsung sowie
5. Rad/Führungrad



Herunterklappbare
Seitengitter



Erhöhte Festigkeit der Rückenlehne: gestattet umfassendere medizinische Behandlungsmethoden.



ERGONOMIE

Matratze mit Stretchgewebe. Kopfkissen. Flexibilität dank der elektrischen Bewegungen.



PATIENTENKOMFORT

Full Washable System : Matratze, Liegefläche und Gehäuse in kürzester Zeit und ohne Werkzeuge abnehmbar!



HYGIENE

Schiebegriffe, kopf- und fußseitig. 5. Rad/Führungsrad direkt unter dem Schwerpunkt des Patienten!



WENDIGKEIT

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite (Basis: 60 cm): 81 cm
Gesamtlänge: 190 cm

Höhenverstellbar von 49 cm bis 75 cm
Breite der Sitzfläche: 60 cm oder 70 cm

Trendelenburg-Bewegung: 15°
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 85°
Beinauflage verstellbar von 0° bis 70°

Räder: Ø 15 cm, mit Zentralbremsung

Stärke der Polsterung: 10 cm

Höchstbelastung: 240 kg

STANDARD

Gehäuse aus Stahl - weiße Epoxid-Kunstharzbeschichtung
2 herunterklappbare Seitengitter
Elektrische Funktionen: Rückenlehne, Beinauflage, Höhenverstellung, Trendelenburg-Bewegung, mit Kabelfernbedienung
Führungsgriffe, kopf- und fußseitig
Rechteckiges Kopfkissen
Abnehmbare Urban-Polsterung

Teleskopischer Infusionsständer



Kopfkissen



Esstablent

OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- Akku
- Herunterklappbare Seitengitter, teleskopisch
- Eine andere Farbe als die Standardfarbe
- Dokumentenhalterung
- Schlauch für die Fernbedienung, mit Halterung
- LED-Leselampe, beweglich
- Besonders komfortable Matratze
- Esstablent
- Papierrollenhalterung
- Plastikschutz für die Beinauflage
- Scheiben für die Verriegelung der Seitengitter
- Halterung für Accessoires, unter die Sitzfläche klappbar
- Infusionsständer: einfach
- Infusionsständer: teleskopisch
- Rechteckiges Kissen
- Räder Ø 20 cm



Aku Vue

AMBULANTER OPHTHALMOLOGISCHER BEHANDLUNGSSESSEL



■ PATIENTENTRANSFER, AMBULANTE PFLEGE, OPHTHALMOLOGIE - AN EINE VIELZAHL VON BEDÜRFNISSEN ANPASSBAR! ■

Full Washable System*



Herunterklappbare
 Seitengitter



Zentralbremsung



Verstärkte Festigkeit der Rückenlehne, um präzise medizinische Verfahren anzuwenden.



ERGONOMIE

Kissen und Kopfstütze verstellbar. Geschmeidige elektrische Funktionalitäten.



PATIENTENKOMFORT

Full Washable System: Matratze, Liegefläche und Gehäuse in kürzester Zeit und ohne Werkzeuge abnehmbar!



HYGIENE

Schiebegriffe, kopf- und fußseitig. 5. Rad/Führungsrad direkt unter dem Schwerpunkt des Patienten!



WENDIGKEIT

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 83,4 cm
Gesamtlänge: 195 cm

Höhenverstellung: 49 cm bis 75 cm
Breite der Liegefläche: 62 cm
Länge der Liegefläche: 190 cm

Trendelenburg-Bewegung: 15°
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 85°
Beinauflage verstellbar von 0° bis 70°

Räder: Ø 20 cm, mit Zentralbremsung

Stärke der Polsterung: 8 cm

Anpassbare
Kopfstütze



Höchstbelastung: 240 kg

STANDARD

Gehäuse aus Stahl -
weiße Epoxid-Kunstharzbeschichtung
Bremspedale, kopf- und fußseitig
Räder mit Zentralbremsung und 5. Rad/
Führungsrad
Höhenverstellbare Seitengitter
Universalschienen
Feste Schiebegriffe, fußseitig
Steuergerät 4S, ohne Batterie
Handfernbedienung mit Reset-Knopf
Kopfstütze mit Feststellsystem und
Halterung
Kopfkissen für die Kopfstütze

OPTIONEN (Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- Akku
- Herunterklappbare Schiebegriffe, fußseitig
- Kopfstützensystem, abnehmbar
- Ruhekopfstütze, abnehmbar (nur in Verbindung mit dem abnehmbaren Kopfstützensystem)



Trendelenburg-Bewegung und Reset-Knopf auf der Handfernbedienung

Fusion + mit Kopfstütze

BEHANDLUNGSSSEL MIT SEITENGITTERN



BEHANDLUNGSESSEL
MIT ARMLEHNEN

BEHANDLUNGSESSEL MIT ARMLEHNEN



DHC Packot Line

BEHANDLUNGSSSEL FÜR DIE DIALYSE, ENTNAHME UND ONKOLOGIE




■ EXTRA-KOMFORT UND AUTONOMIE FÜR IHRE WERTEN PATIENTEN! ■



Herunter-
klappbare
Armlehnen

Glattes und anti-
bakterielles Gehäuse

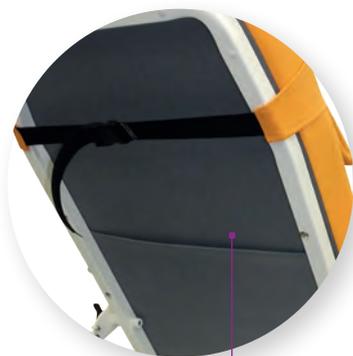

Dokumentenhalterung
in der Rückenlehne



UNSERE
FARB-
PALETTE
STAMSKIN

Verschiedene Armlehnen, um sich den spezifischen Bedürfnissen anzupassen: Dialyse, Entnahme, Onkologie.



ERGONOMIE

Besonders komfortable Polsterung von 10 cm Stärke, auf freischwingender Sitzfläche.



PATIENTENKOMFORT

Stabiles Stahlgestell mit Epoxid-Beschichtung auf 2 Hubsäulen. Schocklage auf der Fernsteuerung.



SICHERHEIT

Glattes Schutzgehäuse aus Hart-PVC, antibakteriell, abnehmbar.



HYGIENE

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 95 cm
Gesamtlänge: 203 cm

Höhenverstellbar von 59 cm bis 99 cm
Breite der Sitzfläche: 58 cm

Trendelenburg-Bewegung: 15°
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 85°
Beinauflage verstellbar von 0° bis 70°

Räder: Ø 12,5 cm,
voneinander unabhängige Bremsen

Stärke der Polsterung: 10 cm

Höchstbelastung: 200 kg

STANDARD

Grundgestell aus Stahl -
mit Epoxid-Kunstharzbeschichtung

4 Räder, voneinander unabhängige
Bremsen

Elektrische Funktionen: Rücken-
lehne, Beinauflage, Höhenverstel-
lung, Trendelenburg-Bewegung,
mit Kabelfernbedienung

2 Armlehnen

Neigung variierbar: komfortabel
oder für den Notfall



Esstablett
(optional)



Elektrisch verstellbare
Fußauflage (optional)

OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere
Optionen und Ideen)


- 4 Räder Ø 15 cm, mit Zentralbremsung
- 4 Räder Ø 15 cm, mit Zentralbremsung sowie
5. Rad/Führungsrad
- Bremspedale, vorn
- Herunterklappbare Armlehnen, mit variabler Geo-
metrie, mit Kugelgelenk
- Multipositions-Armlehnen, mit seitlichem Versatz
- Sitzfläche verstärkt durch (abnehmbaren) Hub-
zylinder
- Steuerelement, mit Akku
- Eine andere Farbe als die Standardfarbe
- Schlauch für die Fernbedienung, mit Halterung
- LED-Leselampe, beweglich
- Esstablett 60 cm x 40 cm, mit Halterung
- Herunterklappbarer Führungsgriff, kopfseitig
- Papierrollenhalterung
- Plastikschutz für die Beinauflage
- Verlängerte Beinauflage
- Vorgerüstete Fußauflage, abnehmbar
- Besonders komfortable Polsterung

Méridienne 3

BEHANDLUNGSESSEL FÜR DIE DIALYSE, ENTNAHME UND ONKOLOGIE



■ EIN BESONDERS BREITER DIALYSE-SESSEL - MIT KOMFORT-LIEGEFLÄCHE - FÜR ADIPOSITAS-PATIENTEN ■

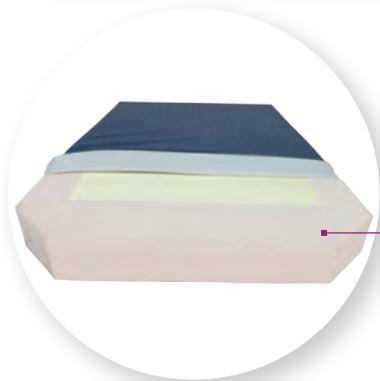

Besonders
komfortable
Matratze
mit Memory-
Schaumstoff



Glatte und antibakterielle Gehäuse

Elektrische
Rückenlehne



UNSERE
FARBEN
KISSEN &
ARMLEHNEN
STAMSKIN

Die Armlehnen lassen sich nach innen wenden und besitzen 2 Höhen, um sich an die Körpermaße Ihres Patienten anzupassen.



ERGONOMIE

Besonders breite Liegefläche mit ultra-komfortabler Matratze und Kopfkissen.



PATIENTENKOMFORT

Stabiles Stahlgestell mit Epoxid-Beschichtung auf 2 Hubsäulen. Schocklage als Funktion auf der Fernsteuerung.



SICHERHEIT

Glattes Schutzgehäuse aus Hart-PVC, antibakteriell behandelt und anhebbar.



HYGIENE

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 109 cm
Gesamtlänge: 230 cm

Höhenverstellbar von 60 cm bis 102 cm
Breite der Sitzfläche: 69 cm

Trendelenburg-Bewegung: 15°
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 85°
Beinauflage verstellbar 0° bis 40°

Räder: Ø 15 cm, mit Zentralbremsung

Stärke der Polsterung: 12 cm

Höchstbelastung: 250 kg

STANDARD

Grundgestell aus Stahl -
mit Epoxid-Kunstharzbeschichtung
4 Räder, mit Zentralbremsung
Elektrische Funktionen: Rücken-
lehne, Beinauflage, Höhenverstel-
lung, Trendelenburg-Bewegung,
mit Kabelfernbedienung
Elektrische Fußauflage
2 Armlehnen
Rechteckiges Kissen
Besonders komfortable Matratze



OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- Akku
- Sicherheitsgürtel
- Eine andere Farbe als die Standardfarbe
- Dokumentenhalterung
- LED-Leselampe, beweglich
- Esstablrett 60 cm x 40 cm, mit Halterung
- Papierrollenhalterung
- Infusionsständer: einfach
- Infusionsständer: teleskopisch



Armlehnen mit Gasdruck



Multipositionale Armlehnen



DHC Fusion A

FÜR DEN AMBULATEN BEREICH



■ ULTRA KOMPAKTER SESSEL MIT ABNEHMBAREM GEHÄUSE FÜR OPTIMALE ERGONOMIE ■



Ablagekorb
(optional)

USB Anschluß
(optional)



Führungsbügel kopfseitig

Laufrollen ø125 mm mit
unabhängigen Bremsen



Komfort und Sicherheit für den Patienten mit ansprechendem Design.



ERGONOMIE

Bequeme Schaumpolsterung mit hoher Widerstandsfähigkeit Stärke 10 cm



PATIENTENKOMFORT

Eine solide Struktur mit stabilem Fußgestell und robusten Armlehnen zum einfachen Einstieg



SICHERHEIT

Leichter Transport durch einen Führungsbügel und 4 Doppelaufrollen



WENDIGKE

Technische Beschreibung

Gesamtbreite : 960 mm
Gesamtlänge : 1700 mm

Breite der Polsterfläche : 620 mm
Länge der Polsterfläche : 1700 mm

Feste Höhe: 48 cm (ohne Polsterung)
Beinauflage : 0 à 93°
Rückenlehne : 0 à 75°
Feste Neigung: 3°

Rollen: ø 125 mm mit unabhängigen Bremsen
Polsterstärke: 10 cm

Maximale Belastung: 240 kg

STANDARD

Grundgestell aus Stahl
mit Epoxid-Kunstharzbeschichtung
4 Rollen ø 125 mm mit unabhängigen Bremsen
Führungsbügel kopfseitig
Rückenlehne mit Hubzylinder
Armlehnen senkbar in Verbindung mit der Rückenlehne
Kopfkissen



Abnehmbares Gehäuse
ohne Werkzeug
(optional)

OPTIONS (Befragen Sie uns gern für weitere Optionen)

Höhenverstellbare Version
USB Anschluß
Grundgestell mit abnehmbarem Gehäuse
Eßtablett 600 x 400 mm
Halterung für Zubehör
Leselampe
Batterie (mit 50 Betriebszyklen)
Antidekubituskissen
Abklappbare Führungsriffe
Elektrische Rückenlehne und Beinauflage
Sauerstoffflaschenhalterung
Infusionsständer
Ablagekorb
Pneumatische Neigung
Seitengitter "Perfect Transfert"



Komfort- oder Notfallneigung

DHC Fusion + mit Polsterung

BEHANDLUNGSSESSEL FÜR DIE DIALYSE, ENTNAHME UND ONKOLOGIE




■ IN DER "DESIGN"-KATEGORIE FÜR SEINE ERGONOMISCHEN FUNKTIONALITÄTEN NOMINIERT! ■

i-NOVO
AWARDS
2016



Nominierte Kategorie:
"Medizinisches Design"

Full Washable System®

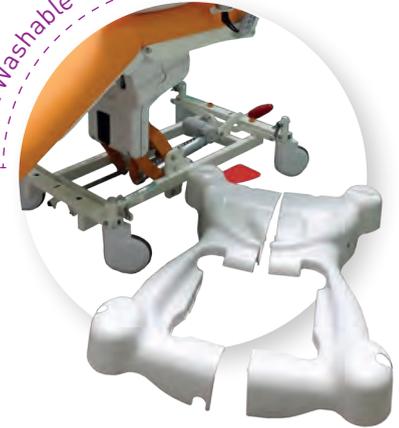

Kabel-
fernbedienung

Pedale für die
Schocklage



Die Armlehnen lassen sich nach innen wenden und besitzen 2 Höhen, um sich an die Körpermaße Ihres Patienten anzupassen.



ERGONOMIE

Gepolsterte Armlehnen. Kopfkissen. Besonders komfortable Polsterung. Elektrische Funktionen.



PATIENTENKOMFORT

Schocklage wird durch ein Fußpedal aktiviert, wodurch die Hände des Pflegepersonal frei bleiben.



SICHERHEIT

Full Washable System: Das antibakteriell behandelte Gehäuse ist ohne Werkzeuge und in Rekordzeit abnehmbar.



HYGIENE

Technische Beschreibung:

- Gesamtbreite: 80 cm
- Gesamtlänge: 195 cm
- Höhenverstellbar von 49 cm bis 75 cm
- Breite der Sitzfläche: 60 cm
- Trendelenburg-Bewegung: 15°
- Rückenlehne verstellbar von 0° bis 85°
- Beinauflage verstellbar von 0° bis 70°
- Räder: Ø 15 cm, voneinander unabhängige Bremsen
- Stärke der Polsterung: 10 cm

Höchstbelastung: 240 kg

STANDARD

Grundgestell aus Stahl - mit Epoxid-Kunstharzbeschichtung
 4 Räder, voneinander unabhängige Bremsen
 Elektrische Funktionen: Rückenlehne, Beinauflage, Höhenverstellung, Trendelenburg-Bewegung, mit Kabelfernbedienung
 Pedale für die Schocklage, fußseitig
 2 Armlehnen
 Rechteckiges Kopfkissen
 Feste Urban-Polsterung (M1 hitzebeständig)

Bequeme Neigungseinstellung oder Schocklage



OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- 4 Räder Ø 15 cm, mit Zentralbremsung
- Akku
- Eine andere Farbe als die Standardfarbe
- Kopfkissen
- Dokumentenhalterung
- Schlauch für die Fernsteuerung, mit Halterung
- LED-Leselampe, beweglich
- Bremspedale, kopf- und fußseitig
- Esstablett
- Papierrollenhalterung
- Elektrische Fußauflage
- Plastikschutz für die Beinauflage
- Accessoires-Halterung (unter die Sitzfläche klappbar)
- Infusionsständer: einfach
- Infusionsständer: teleskopisch
- Schwingende Sitzfläche und Rückenlehne




DHC Fusion + mit Matratze

BEHANDLUNGSSESSEL FÜR DIE DIALYSE, ENTNAHME UND ONKOLOGIE



■ IN DER "DESIGN"-KATEGORIE FÜR SEINE ERGONOMISCHEN FUNKTIONALITÄTEN NOMINIERT! ■

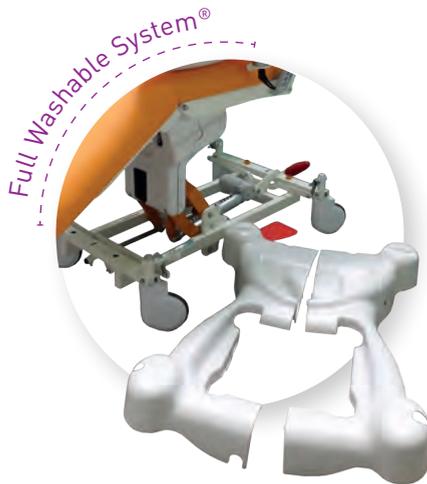

i-NOVO
AWARDS
2016 **DESIGN**

Nominierte Kategorie
"Medizinisches Design"



Multi-
positionale
Armlehnen

Pedale für die
Schocklage



Die Armlehnen lassen sich nach innen wenden und besitzen 2 Höhen, um sich an die Körpermaße Ihres Patienten anzupassen.



ERGONOMIE

Gepolsterte Armlehnen. Kopfkissen. Besonders komfortable Polsterung. Elektrische Funktionen.



PATIENTENKOMFORT

Die Schocklage wird durch ein Fußpedal aktiviert, wodurch die Hände des Pflegepersonal frei bleiben.



SICHERHEIT

Full Washable System: Antibakteriell behandeltes Gehäuse und Matratze sind ohne Werkzeuge und in Rekordzeit abnehmbar.



HYGIENE

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite (Basis: 60 cm): 80 cm
Gesamtlänge: 195 cm

Höhenverstellbar von 49 cm bis 75 cm
Breite der Sitzfläche: 60 cm oder 70 cm

Trendelenburg-Bewegung: 15°
Rückenlehne verstellbar von 0° bis 85°
Beinauflage verstellbar von 0° bis 70°

Räder: Ø 15 cm,
voneinander unabhängige Bremsen

Stärke der Matratze: 8 cm

Höchstbelastung: 240 kg

STANDARD

Grundgestell aus Stahl - mit Epoxid-Kunstharzbeschichtung
4 Räder, voneinander unabhängige Bremsen
Elektrische Funktionen: Rückenlehne, Beinauflage, Höhenverstellung, Trendelenburg-Bewegung, mit Kabelfernbedienung
Pedale für die Schocklage, fußseitig
2 Armlehnen
Rechteckiges Kopfkissen
Abnehmbare Urban-Polsterung (M1 hitzebeständig)

OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- 4 Räder Ø 20 cm, mit Zentralbremsung
- Akku
- Eine andere Farbe als die Standardfarbe
- Kopfkissen
- Dokumentenhalterung
- Schlauch für die Fernsteuerung, mit Halterung
- LED-Leselampe, beweglich
- Esstablett
- Papierrollenhalterung
- Plastikschutz für die Beinauflage
- Beinauflage für die elektrische Fußauflage
- Accessoires-Halterung (unter die Sitzfläche klappbar)
- Infusionsständer: einfach
- Infusionsständer: teleskopisch



Matratze mit Stretchgewebe

Herunterklappbare Halterung für Zubehör (optional)



Fußauflage (optional)

Herunterklappbare Armlehnen

