




OPX mobilis® Operationstische für Ambulanz und OP Beispielhaft flexibel und zuverlässig

IHR FACHBERATER:



RAMMERSTORFER
medizintechnik- & pflegetechnik handels gmbH

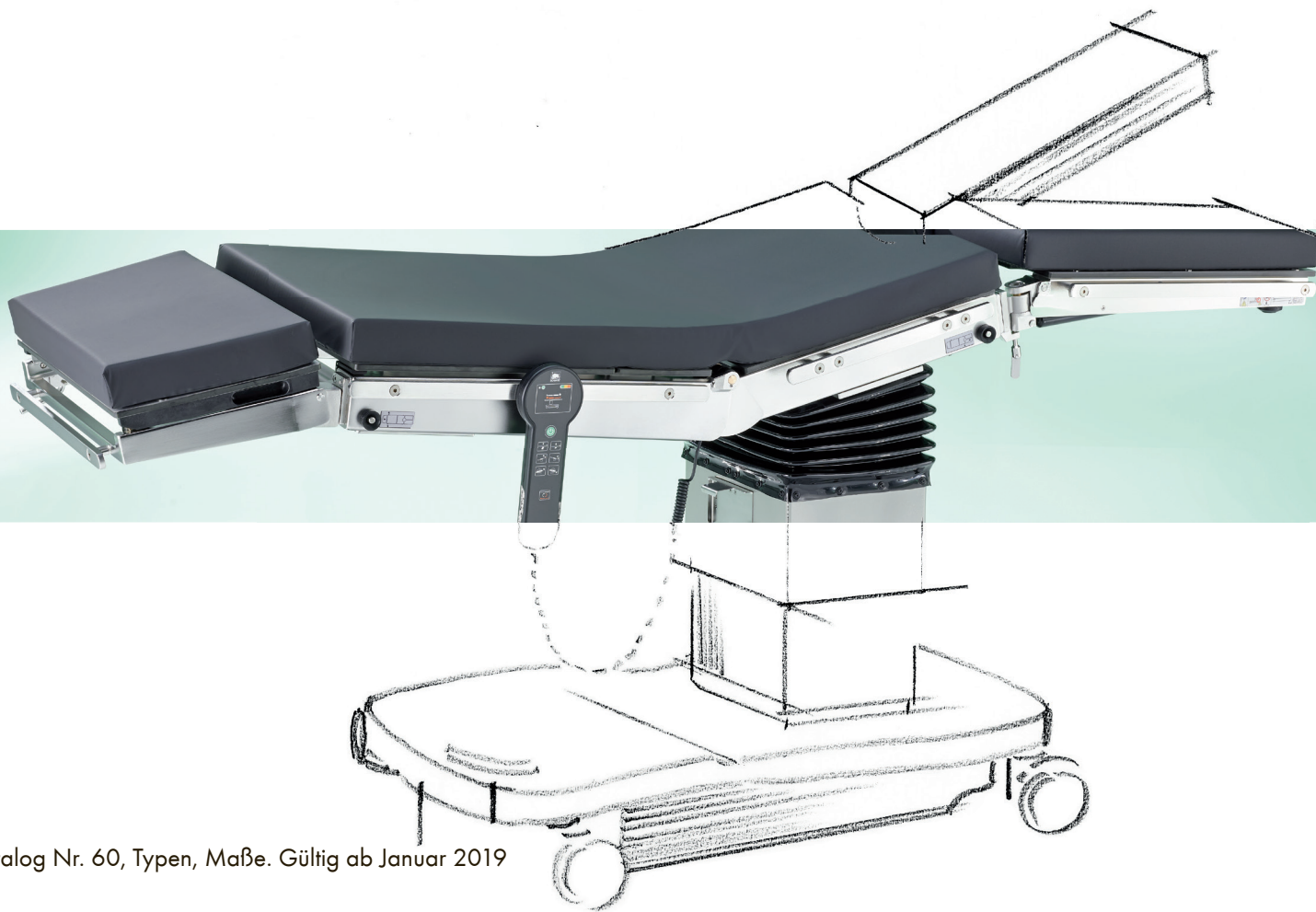

OPX mobilis® 200 Operationstisch –
Leicht und wendig, hydraulisch
und manuell verstellbar

Seite 4-7

OPX mobilis® 300
Universal-Operationstische für alle
chirurgischen Disziplinen

Seite 8-13

OPX mobilis® RC
Fernbedienbare Operationstische
für hohe Ansprüche in der Chirurgie

Seite 14-19

OPX mobilis® Operationstische
Leistungsmerkmale

Seite 20-23

Lagerungen OPX mobilis® 300 und
OPX mobilis® RC


Seite 24-29

Empfehlungen zur Zubehörausstattung für die
unterschiedlichen chirurgischen Disziplinen

Seite 30-31
Das OP-Zubehör ist zugelassen
für SCHMITZ-Operationstische.
Ein anderer Einsatz entspricht
nicht der Zweckbestimmung.



1



2



3



4



5



6

OPX mobilis® 200 Operationstisch

Leicht und wendig
Orts- und energieunabhängig operieren
CE

Aufnahme für
Röntgenkassetten,
röntgenfähige Tischplatte

abnehmbare weiche SAF-Polster,
druckentlastend, flüssigkeitsundurchlässig,
elektrisch leitend



Rückenteilverstellung
mit Gasfederunterstützung
und integriertem
Sicherheitsmechanismus

Vorwählhebel für Hoch/Tief-,
und Trendelenburg-/
Gegentrendelenburgbewegung

Pedal für Zentralfeststellung der Rollen

Pumpenhebel für Hoch/Tief- und
Trendelenburg-/Gegentrendelenburgbewegung



minimale Fugen zwischen den Polstern,
keine Quetschgefahr



leicht zu reinigende,
geschlossene
Oberflächen

4 extrem leicht laufende
Doppelrollen, schwenkbar,
davon 2 Rollen elektrisch
leitend, mit Abdeckung
als Flüssigkeitsschutz

hygienischer Verschluss auch an der
Unterseite der Fußkonstruktion mittels
einer Bodenwanne

**Abb.
Modell-Nr. 161.2010.1 mit
Kopfplatte 101.2580.1 und
Beinplatte 101.2170.1**

Design: Rainer Schindhelm

OPX mobilis® 200

CE

Beschreibung



mobilis® 200 Modell-Nr. 161.2010.1

Operationstisch mit Fußpumpe für die zwei Tischfunktionen:

Hoch/Tief, Trendelenburg/Gegentrendelenburg.

2-teilige, strahlendurchlässige Lagerungsfläche, bestehend aus:

Rückenteil, Sitzteil mit Gyn.-Ausschnitt (wahlweise auch ohne Gyn.-Ausschnitt).

Rückenteilverstellung mit Gasfederunterstützung. Integrierter Kassettentunnel.

SAF-Polsterauflagen, 60 mm stark, elektrisch leitend. Tischrahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl, gestrahlt und elektropoliert, desinfektionsfest. Seitenschiene aus Chromnickelstahl, 25 x 10 mm, an beiden Seiten des Tischoberteils zur Anbringung des Zubehörs, Säule mit Chromnickelstahlverkleidung, fahrbar, 4 elektrisch leitende Doppelrollen, mit Abdeckung, davon 2 Rollen elektrisch leitend, zentral feststellbar über Fußpedal. Fußabdeckung und Bodenwanne aus schlagfestem ABS, desinfektionsmittelfest.

Ohne Kopf- und Beinplatte.

mobilis® 200/G Modell-Nr. 161.2050.1

wie Modell 200, jedoch mit integrierter Gallenbank.



Kopfplatte Modell-Nr. 101.2580.1

neigbar, per Knopfdruck abnehmbar, mit Einhandverstellung, Gasfederunterstützung und integriertem Kassettentunnel.



Kopfplatte Modell-Nr. 101.2590.1

zweifach verstellbar, per Knopfdruck abnehmbar, mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder und Kassettentunnel.



Beinplatte Modell-Nr. 101.2170.1

geteilt, spreiz- und abklappbar, mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder, per Knopfdruck abnehmbar.



Beinplatte Modell-Nr. 101.2180.1

einteilig, manuell abklappbar mit Gasfederunterstützung, per Knopfdruck abnehmbar.



Weiteres Zubehör finden Sie im Katalog Nr. 92.

Technische Daten

Lagerungsbeispiele

Breite der Liegefläche	540 mm
Gesamtbreite	590 mm
Fußabdeckung (Länge x Breite)	1.120 mm x 580 mm
Durchmesser der Doppelrollen	125 mm
Höhenverstellung (ohne Polster)	690 mm – 1.050 mm
Trendelenburg, hydraulisch	30°
Gegentrendelenburg, hydraulisch	30°
Rückenteil	+ 75° - 50°
Beinplatte	+ 20° - 90°
Kopfplatte	+ 30° - 45°
Nettogewicht mobilis 200, 200/G inkl. Kopf- u. Beinplatte	160 kg
Belastbarkeit*:	
Statisch	bis zu 250 kg
Sichere Arbeitslast	bis zu 185 kg

* Die Belastbarkeit kann je nach Patientenorientierung und Lagerung variieren.

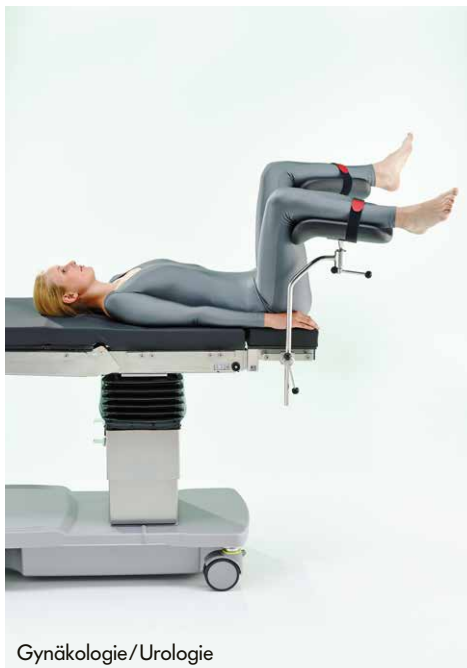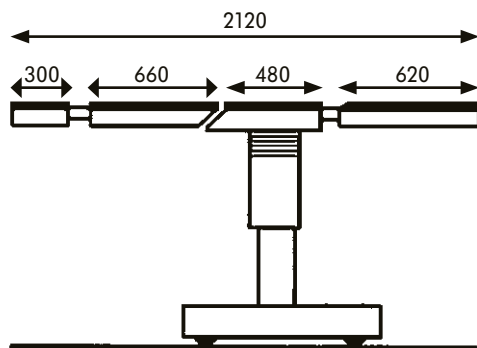

OPX mobilis® 300

Universal-Operationstische

Die Mobilen von SCHMITZ

CE

- Längsverschiebbarkeit der Tischplatte um insgesamt 250 mm für ein optimales Röntgen des Patienten mit dem C-Bogen (nur bei L-Versionen)
- integrierte Gallenbank, kopfseitig über Fußpedal verstellbar (nur bei G-Versionen)

abnehmbare weiche SAF-Polster, druckentlastend, flüssigkeitsundurchlässig, elektrisch leitend



Abb.
mobilis® 300 C
Modell-Nr. 161.3110.1
mit Kopfplatte 101.2590.1
und Beinplatte 101.2170.1

schwenkbarer Vorwählhebel für Hoch/Tief-, Lateral- und Trendelenburg/Gegentrendelenburgbewegung


3-Funktionen-Pedal für Geradeauslauf, freies Verschieben, zentrale Feststellung der Rollen

Pumpenhebel für die Hoch/Tief-, Lateral- und Trendelenburg-/Gegentrendelenburgbewegung





minimale Fugen zwischen den Polstern,
keine Quetschgefahr

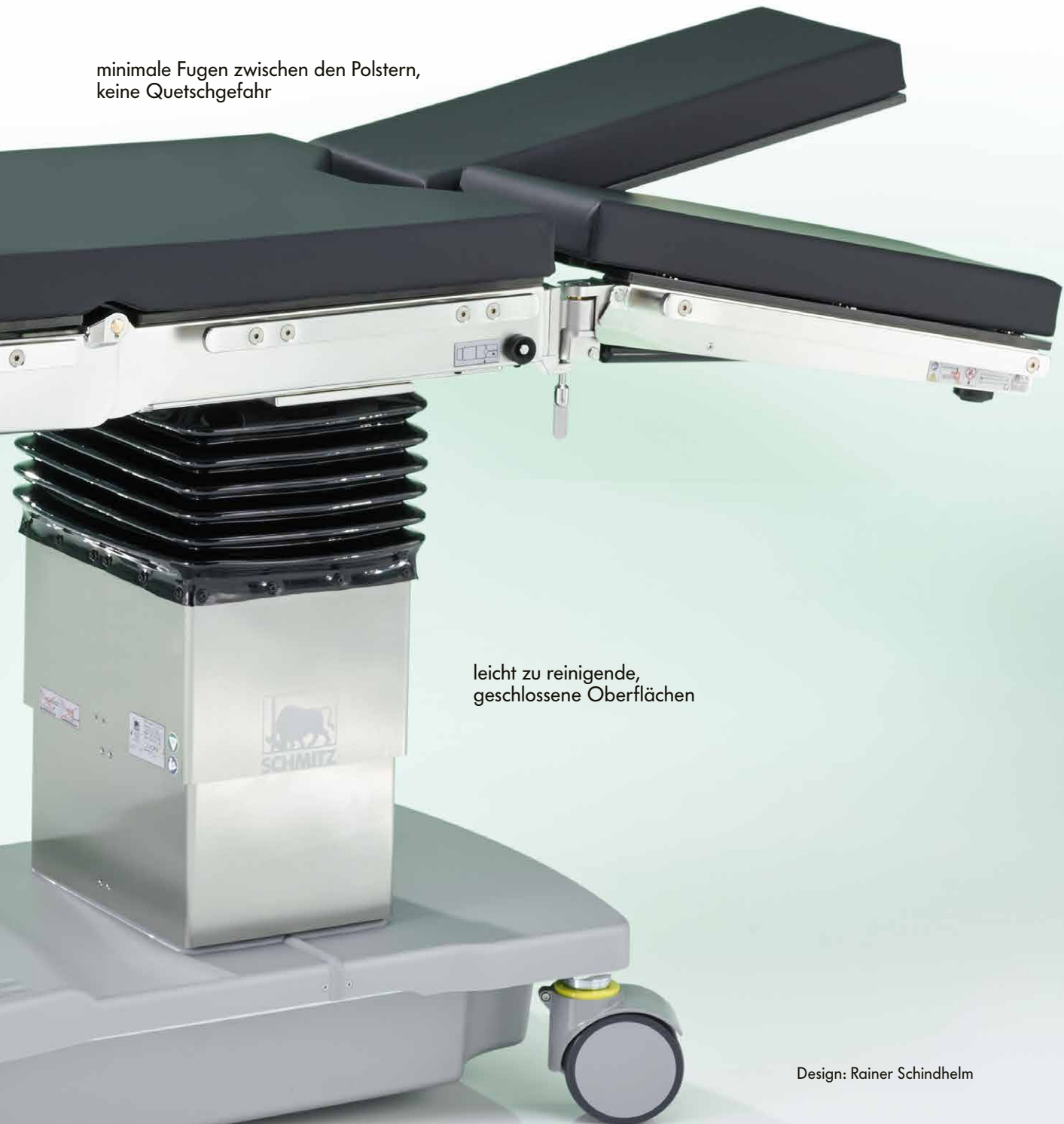

leicht zu reinigende,
geschlossene Oberflächen

Design: Rainer Schindhelm

1 gefederte Richtungsrolle, zuschaltbar
über Fußpedal, für sicheren Geradeauslauf

hygienischer Verschluss auch an der Unterseite
der Fußkonstruktion mittels einer Bodenwanne

4 extrem leicht laufende
Doppelrollen, schwenkbar,
davon 2 Rollen elektrisch
leitend, mit Abdeckung
als Flüssigkeitsschutz

OPX mobilis® 300

CE

Beschreibung

**mobilis® 300 C Modell-Nr. 161.3110.1**

Operationstisch mit Fußpumpe für die 3 Tischfunktionen:
Hoch/Tief, Lateral, Trendelenburg/Gegentrendelenburg
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Abdeckung, davon 2 Rollen elektrisch leitend,
zentral feststellbar über Fußpedal, 1 gefederte Richtungsrolle,
zuschaltbar über Fußpedal.

Ohne Kopf- und Beinplatte.

mobilis® 300 C/G Modell-Nr. 161.3150.1

wie Modell 300 C, jedoch mit integrierter Gallenbank.*

**mobilis® 300 CL Modell-Nr. 161.3210.1**

wie Modell 300 C, jedoch zusätzlich:
manuelle Längsverschiebbarkeit der Tischplatte um insgesamt 250 mm
für ein optimales Röntgen des Patienten mit dem C-Bogen.

Ohne Kopf- und Beinplatte.

mobilis® 300 CL/G Modell-Nr. 161.3250.1

wie Modell 300 CL, jedoch mit integrierter Gallenbank.*

* Integrierte Gallenbank mit Hubhöhe 100 mm.
Kopfseitiges Anwählen der Gallenbank über Vorwahlpedal
und Anheben der Polster über die Fußpumpe.
In Grundstellung ebene Liegefläche.

Beschreibung



Kopfplatte Modell-Nr. 101.2580.1

neigbar, per Knopfdruck abnehmbar, mit Einhandverstellung, Gasfederunterstützung und integriertem Kassettentunnel.



Kopfplatte Modell-Nr. 101.2590.1

zweifach verstellbar, per Knopfdruck abnehmbar, mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder und Kassettentunnel.



Beinplatte Modell-Nr. 101.2170.1

geteilt, spreiz- und abklappbar, mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder, per Knopfdruck abnehmbar.



Beinplatte Modell-Nr. 101.2180.1

einteilig, manuell abklappbar mit Gasfederunterstützung, per Knopfdruck abnehmbar.

Weiteres Zubehör finden Sie im Katalog Nr. 92.

OPX mobilis® 300

Technische Daten

Ausstattung

Technische Daten	300 C 300 C/G	300 CL 300 CL/G
Gesamtlänge ohne Kopf- und Beinplatte	1.140 mm	1.140 mm
Gesamtlänge ohne Kopfplatte, mit Beinplatte	1.780 mm	1.780 mm
Gesamtlänge mit Kopf- und Beinplatte	2.130 mm	2.130 mm
Breite der Liegefläche	540 mm	540 mm
Gesamtbreite	590 mm	590 mm
Bodenplatte (Länge x Breite)	bei allen Modellen 1.120 mm x 580 mm	
Durchmesser der Lenkrollen	125 mm	125 mm
Höhenverstellbereich (ohne Polster)	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm
Trendelenburg, hydraulisch	30°	30°
Gegentrendelenburg, hydraulisch	30°	30°
Lateralverstellung, hydraulisch	+/- 20°	+/- 20°
Längsverschiebung der Tischfläche insgesamt	—	250 mm
Rückenteilneigung	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°
Neigung der Beinplatten	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°
Spreizung der Beinplatten	180°	180°
Neigung der Kopfplatte	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°
Anstellwinkel des Kopfplattenpolsters	25°	25°
Nettogewicht inkl. Kopf- und Beinplatte	180 kg	190 kg
Belastbarkeit*:		
Statisch	bis zu 250 kg	bis zu 250 kg
Sichere Arbeitslast	bis zu 185 kg	bis zu 185 kg

Serienmäßige Ausstattung:

2-teilige, strahlendurchlässige Lagerungsfläche, bestehend aus:

- Rückenteil
- Sitzteil mit Gyn.-Ausschnitt (wahlweise auch ohne Gyn.-Ausschnitt)

Hydraulische Verstellungen:



- Hoch/Tief
- Trendelenburg/Gegentrendelenburg
- Lateral

Betätigung über Vorwähleinrichtung mit optischer Anzeige am Fußteil.









Rückenteilverstellung mit Gasfederunterstützung. Integrierter Kassettentunnel. SAF-Polsterauflagen, 60 mm stark, elektrisch leitend. Tischrahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl, gestrahlt und elektropoliert, desinfektionsmittelbeständig. Seitenschiene aus Chromnickelstahl, 25 x 10 mm, an beiden Seiten des Tischoberteils zur Anbringung des Zubehörs, Säule mit Chromnickelstahlverkleidung. Fußabdeckung und Bodenwanne aus schlagfestem ABS. Fahrwerk mit 4 Doppelrollen mit Abdeckung, davon 2 Rollen elektrisch leitend, zentral feststellbar über Fußpedal, 1 gefederte Richtungsrolle, zuschaltbar über Fußpedal.

* Die Belastbarkeit kann je nach Patientenorientierung und Lagerung variieren.

300 C, 300C/G

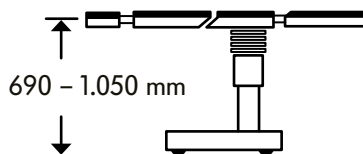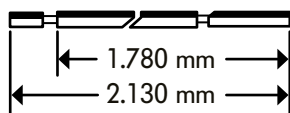

300 CL, 300 CL/G

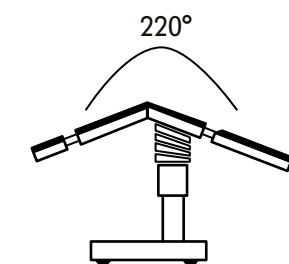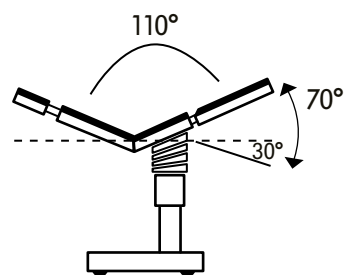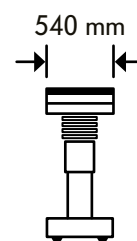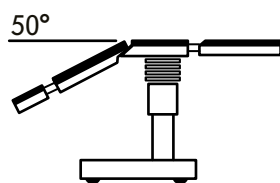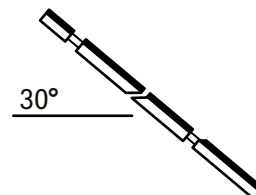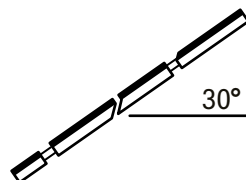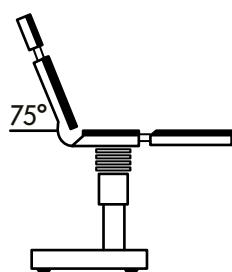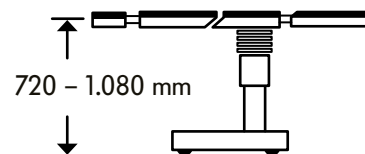

OPX mobilis® RC

Die neue Generation für
Komfort und Zuverlässigkeit in der Chirurgie
CE

Abb.
mobilis® RC 40
Modell-Nr. 161.4510.1
mit Kopfplatte 101.2590.1
Beinplatte 101.2170.1

abnehmbare, weiche SAF-Polster,
druckentlastend, flüssigkeitsundurchlässig,
elektrisch leitend.



Rückenteilverstellung
elektrohydraulische Verstellung
des Rückenteils per Fernbedienung
oder über die Hydraulikpumpe
(nur mobilis RC 40 Modelle)



3-Funktionen-Pedal
für Geradeauslauf,
freies Verschieben
und zentrale Feststellung

minimale Fugen zwischen den Polstern,
keine Quetschgefahr



Fernbedienung
zur direkten Anwahl
der gewünschten Funktion

**Akku-
kapazitätsanzeige**

Aktivierungstaste
gegen unbeabsichtigtes
Betätigen einer Funktion

Hinterleuchtete Tasten
für eine sichere Bedienung in
einem abgedunkelten OP

Reverse-Mode
Umstellung der Funktionen bei
umgekehrter Patientenlagerung

Optionale 0-Position
Rückstellung des Tisches
in die Ausgangsposition

OPX mobilis® RC

CE

Beschreibung



mobilis® RC 30 Modell-Nr. 161.3510.1

Universal-Operationstisch mit elektrohydraulischer Verstellung über Handbedienung für die 3 Tischfunktionen: Hoch/Tief, Lateral, Trendelenburg/Gegentrendelenburg. Zusätzliche hydraulische Verstellmöglichkeiten dieser Funktionen über Fußpumpe. Manuelle Rückenteilverstellung mit Gasfederunterstützung. Wiederaufladbare Batterien. Separates Ladegerät mit Netzkabel 230 V. Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Abdeckung, davon 2 Rollen elektrisch leitend, zentral feststellbar über Fußpedal, 1 gefederte Richtungsrolle, zuschaltbar über Fußpedal. **Ohne Kopf- und Beinplatte.**

mobilis® RC 30/G Modell-Nr. 161.3550.1

wie Modell RC 30, jedoch mit integrierter Gallenbank.*

mobilis® RC 30 L Modell-Nr. 161.3610.1

wie Modell RC 30, jedoch zusätzlich:
manuelle Längsverschiebbarkeit der Tischplatte um insgesamt 250 mm für ein optimales Röntgen des Patienten mit dem C-Bogen.

mobilis® RC 30 L/G Modell-Nr. 161.3650.1

wie Modell RC 30 L, jedoch mit integrierter Gallenbank.*

Nullrückstellung Modell-Nr. 101.0225.0

für RC 30 Modelle, nicht nachrüstbar.



mobilis® RC 40 Modell-Nr. 161.4510.1

Universal-Operationstisch mit elektrohydraulischer Verstellung über Handbedienung für die 4 Tischfunktionen: Hoch/Tief, Lateral, Trendelenburg/Gegentrendelenburg, Rückenteil. Zusätzliche hydraulische Verstellmöglichkeiten dieser Funktionen über Fußpumpe. Wiederaufladbare Batterien. Separates Ladegerät mit Netzkabel 230 V. Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Abdeckung, davon 2 Rollen elektrisch leitend, zentral feststellbar über Fußpedal, 1 gefederte Richtungsrolle, zuschaltbar über Fußpedal. **Ohne Kopf- und Beinplatte.**

mobilis® RC 40/G Modell-Nr. 161.4550.1

wie Modell RC 40, jedoch mit integrierter Gallenbank.*

mobilis® RC 40 L Modell-Nr. 161.4610.1

wie Modell RC 40, jedoch zusätzlich:
manuelle Längsverschiebbarkeit der Tischplatte um insgesamt 250 mm für ein optimales Röntgen des Patienten mit dem C-Bogen.

mobilis® RC 40 L/G Modell-Nr. 161.4650.1

wie Modell RC 40 L, jedoch mit integrierter Gallenbank.*

Nullrückstellung Modell-Nr. 101.0226.0

für RC 40 Modelle, nicht nachrüstbar.



* Integrierte Gallenbank mit Hubhöhe 100 mm.
Kopfseitiges Anwählen der Gallenbank über Vorwahlpedal und Anheben der Polster über die Fußpumpe.
In Grundstellung ebene Liegefläche.

Beschreibung



Kopfplatte Modell-Nr. 101.2580.1

neigbar, per Knopfdruck abnehmbar, mit Einhandverstellung, Gasfederunterstützung und integriertem Kassettentunnel.



Kopfplatte Modell-Nr. 101.2590.1

zweifach verstellbar, per Knopfdruck abnehmbar, mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder und Kassettentunnel.



Beinplatte Modell-Nr. 101.2170.1

geteilt, spreiz- und abklappbar, mit integriertem Gewichtsausgleich über Gasfeder, per Knopfdruck abnehmbar.



Beinplatte Modell-Nr. 101.2180.1

einteilig, manuell abklappbar mit Gasfederunterstützung, per Knopfdruck abnehmbar.

Weiteres Zubehör finden Sie im Katalog Nr. 92.

OPX mobilis® RC

Technische Daten

Ausstattung

Technische Daten	RC 30 RC 30/G	RC 30 L RC 30 L/G	RC 40 RC 40/G	RC 40 L RC 40 L/G
Gesamtlänge ohne Kopf- und Beinplatte	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm
Gesamtlänge ohne Kopfplatte, mit Beinplatte	1.780 mm	1.780 mm	1.780 mm	1.780 mm
Gesamtlänge mit Kopf- und Beinplatte	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm
Breite der Liegefläche	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Gesamtbreite	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Bodenplatte (Länge x Breite)	bei allen Modellen 1.120 x 580 mm			
Durchmesser der Lenkrollen	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Höhenverstellbereich (ohne Polster)*	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm	690 mm – 1.050 mm	720 mm – 1.080 mm
Trendelenburg*	30°	30°	30°	30°
Gegentrendelenburg*	30°	30°	30°	30°
Lateralverstellung*	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Längsverschiebung der Tischfläche insgesamt	—	250 mm	—	250 mm
Rückenteilneigung	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°	+ 75/- 50°*	+ 75/- 50°*
Neigung der Beinplatten	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°	+ 20/- 90°
Spreizung der Beinplatten	180°	180°	180°	180°
Neigung der Kopfplatte	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°	+ 30/- 45°
Anstellwinkel des Kopfplattenpolsters	25°	25°	25°	25°
Nettogewicht inkl. Kopf- und Beinplatte	210 kg	220 kg	215 kg	225 kg
Belastbarkeit**:				
Statisch (bis zu)	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Sichere Arbeitslast (bis zu)	185 kg	185 kg	225 kg	225 kg
Batteriebetrieb	■	■	■	■
Separates Ladegerät 100 – 230 V, 50 – 60 Hz	■	■	■	■

■ serienmäßig

* Elektrohydraulische Verstellung

** Die Belastbarkeit kann je nach Patientenorientierung und Lagerung variieren.

Serienmäßige Ausstattung:

2-teilige, strahlendurchlässige Lagerungsfläche, bestehend aus:

- Rückenteil
- Sitzteil mit Gyn.-Ausschnitt (wahlweise auch ohne Gyn.-Ausschnitt)

Elektrohydraulische Verstellungen über Handbedienung:

- Hoch/Tief
- Trendelenburg /Gegentrendelenburg
- Lateral
- Rücken (nur RC 40-Modelle)

Manual Override:

Unabhängige Verstellmöglichkeit dieser Funktionen über Vorwähleinrichtung und Fußpumpe.



Rückenteilverstellung mit Gasfederunterstützung (nur RC 30-Modelle). Integrierter Kassettentunnel. SAF-Polsterauflagen, 60 mm stark, elektrisch leitend. Tischrahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl, gestrahlt und elektropoliert, desinfektionsmittelbeständig. Seitenschiene aus Chromnickelstahl, 25 x 10 mm, an beiden Seiten des Tischoberteils zur Anbringung des Zubehörs, Säule mit Chromnickelstahlverkleidung. Fußabdeckung und Bodenwanne aus schlagfestem ABS. Fahrwerk mit 4 Doppelrollen mit Abdeckung, davon 2 Rollen elektrisch leitend, zentral feststellbar über Fußpedal, 1 gefederte Richtungsrolle, zuschaltbar über Fußpedal.

Wiederaufladbare Batterien.









Separates Ladegerät mit Netzkabel.

Bitte beachten: Das Ladegerät ist geeignet für Spannungen von 100 - 230 V bei 50 - 60 Hz Netzfrequenz und verfügt über eine genormte Kaltgerätesteckdose.

RC 30, RC 40,
RC 40/G, RC 30/G

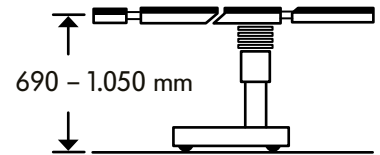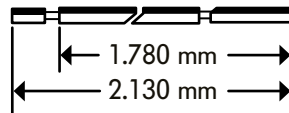

RC 30 L, RC 30 L/G,
RC 40 L, RC 40 L/G

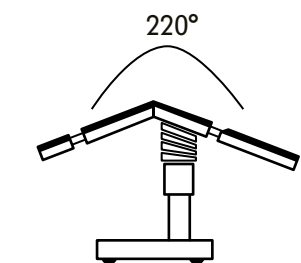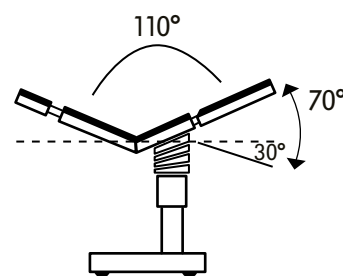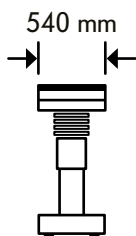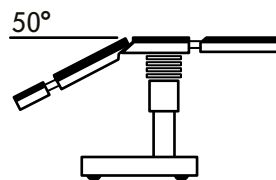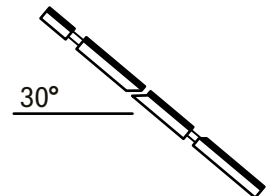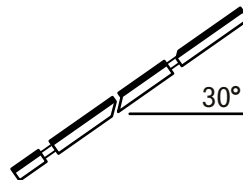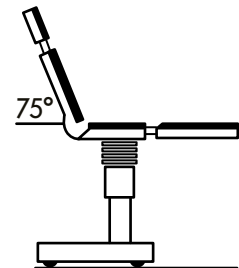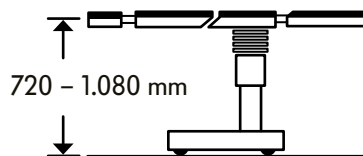

OPX mobilis® Operationstische

Das Plus an Funktion und Mobilität

Handbedienung

Zur Bedienung der elektrohydraulischen Verstellfunktionen des Tisches. Die Handbedienung besitzt eine Akku-Ladestandsanzeige sowie eine Aktivierungstaste gegen unbeabsichtigtes Auslösen einer Funktion. Die Funktions-taste „Reverse Mode“ erlaubt das normale Ausführen der Tischfunktionen bei umgekehrter Lagerung des Patienten. Hinterleuchtete Tasten für eine sichere Bedienung in einem abgedunkelten OP. Optional ist die Handbedienung mit einer Funktions-taste für die Null-Stellung ausgestattet.

Manual Override

Neben der elektrischen auch zusätzliche manuelle Verstellmöglichkeit des Tisches mittels Vorwählhebel und Hydraulikpumpe.

Fußbedienung (Zubehör) für RC-Modelle

Für alle elektrischen Tischfunktionen. Aktivierungstaste und Funktionstaste „Null-Stellung“.

Fahrwerk

4 leicht laufende Doppelrollen mit Abdeckung, zentral feststellbar über Fußpedal. 1 gefederte Richtungsrolle, zuschaltbar über Fußpedal (außer bei mobilis 200).

Integrierte Gallenbank (G-Modelle)

Hubhöhe 100 mm. Anwählen der Gallenbank über Vorwahlpedal und Anheben der Polster kopfseitig über die Fußpumpe. In Grundstellung ebene Liegefläche.



Handbedienung



Manual Override



Fußbedienung

		Ref. Certif. No. DE1-53352
IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME		
SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) MIT THEORIE OC		
CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC		
Product Nom et adresse du demandeur Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine Ratings and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe) Type of Manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme du laboratoire d'essais constructeur Model / Type Ref. Ref. De type Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2 ^{ème} page) A sample of the product was tested and found to be in conformity with Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification	Operating table Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG Zum Ostentfeld 29, 58739 Wickede (Ruhr) GERMANY Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG Zum Ostentfeld 29, 58739 Wickede (Ruhr) GERMANY Schmitz & Söhne GmbH & Co. KG Wark Boenen Rudolf-Diesel-Straße 5, 59199 Boenen GERMANY ☐ Additional information on page 2 DC 24 V, max. 2 A (IP5) battery charger AC 90-264 V, 50/60 Hz mobilis 300, mobilis RC30, mobilis 200, mobilis RC40, OPX mobilis RC ☐ Additional information on page 2 IEC 60601-1 (ed.3):am1 IEC 60601-2-46 (Ed.2) 5007249-2863-000/1193930	
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH VDE Testing and Certification Institute Zertifizierung Produkte / Certification Products Date: 2014-12-03 Signature:		

Geprüfte Sicherheit nach dem CB-Verfahren gemäß IEC 60601 durch ein unabhängiges und autorisiertes deutsches Prüfinstitut.



Fahrwerk



Vorwähleinrichtung für Gallenbank



Integrierte Gallenbank

OPX mobilis® Operationstische

Das Plus an Funktion und Mobilität

1

Ladegerät

für elektrisch betriebene Tische, abnehmbar. Ladezeit ca. 8 Std., klein und handlich, unempfindlich gegen Beschädigungen, genormte Kaltgerätesteckdose mit eingestecktem Netzkabel. Erhaltungsladung des Akkus.

2

Eine Polsterfixierung mittels

Gelkleber sorgt für optimalen Halt der Polster. Der Gelkleber ist **desinfektionsmittelbeständig** und ermöglicht beste hygienische Voraussetzungen im OP.

3

Option: CFK-Strebe am Rückenteil, strahlendurchlässig.

4

Abnehmen von Kopf- und Beinplatte per Knopfdruck

Das einfache Austauschen von Kopf- und Beinplatte ermöglicht die Lagerung des Patienten im Reverse-Mode. Ein problemloses Anbringen der Tischelemente wird durch eine gesicherte Aufnahme ermöglicht.

5

Die SAF Polsterauflagen gewährleisten eine Dekubitusprophylaxe bei gleichzeitig hohem Komfort für den Patienten.

6

Durchgehende Aufnahmeschienen für Röntgenkassetten.

7

Zentraler Versorgungspunkt für den Anschluss des Netzkabels und Potentialausgleichs. Aktivierungstaste und Display für technische Statusinformationen.

8

Rollenabdeckung als Flüssigkeitsschutz

9

Längsverschiebung der Tischfläche (L-Modelle)


insgesamt um 250 mm



1



2

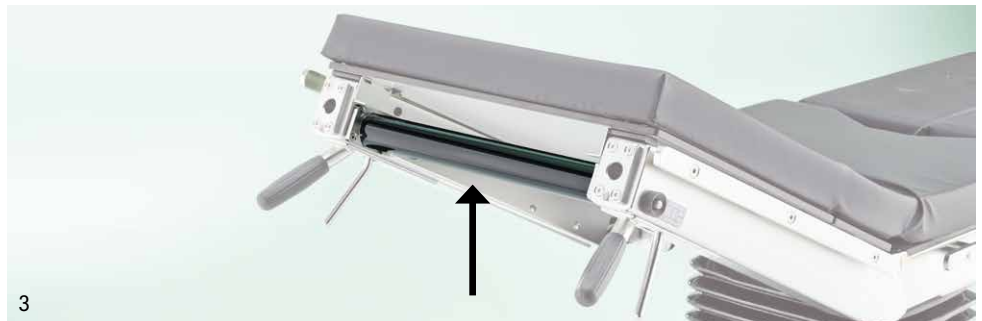

3



4



5



6



7



8



9

OPX mobilis® 300, RC 30, RC 40

Lagerungen



Nierenlagerung/Thoraxchirurgie



Humerusnagelung



Laparoskopie



Neurochirurgie



Arthroskopie



Urologie



Neurochirurgie



Urologie

OPX mobilis® 300, RC 30, RC 40

Lagerungen





Wirbelsäulenoperation



Schulteroperation



MKG-Chirurgie



Zubehör
101.0242.0 +
101.0364.0 +
101.0266.0

OPX mobilis® 300, RC 30, RC 40 Lagerungen





Oberschenkelhalsfrakturen



Unterschenkschaftfrakturen

Empfehlung zur Zubehörausstattung für OPX mobilis® Operationstische

Allgemeine Chirurgie

- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- 101.0019.0 Armauflage
- 101.0123.0 Handfessel
- 101.0177.0 Körpergurt
- 101.0012.0 Narkosebogen
- 101.0111.0 Narkosebogen-
verlängerungen

Gynäkologie

- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- 2x 101.0115.0 Beinhalter nach Göpel
- 2x 101.0146.0 Spannkloben
- 101.0019.0 Armauflage
- 101.0123.0 Handfessel
- 101.0012.0 Narkosebogen
- 101.0111.0 Narkosebogen-
verlängerungen

HNO/MKG

- Tischmodell ohne Gyn-Ausschnitt
Variante 1
- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.0332.0 Gel-Kopfring
- 101.2180.1 Beinplatte
- Variante 2 - Reverse-Mode Lagerung
anstelle der Beinplatten
- 101.2720.0 Universaladapter
- 101.0363.0 Zwischenstück
- 101.0155.0 Kopfkalotte
- Variante 3 - Reverse-Mode Lagerung
anstelle der Beinplatten
- 101.2780.1 Schulterplatte
- 101.0363.0 Zwischenstück
- 101.0155.0 Kopfkalotte
- zusätzlich, für alle drei Varianten
- 2x 101.0019.0 Armauflage
- 101.0177.0 Körpergurt
- optional
- 101.6400.0 Fußbedienung
(nur für RC-Modelle)

Urologie/TUR

- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- 101.6010.1 Uro-Adapter
- 101.0182.0 Schwenkbecken mit
Halterung
- 101.0191.0 Siebeinsatz
- 101.6020.0 Ellenbogenstützen (1 Paar)
- 2x 101.0115.0 Beinhalter nach Göpel
- 2x 101.0146.0 Spannkloben
- 101.0019.0 Armauflage
- 101.0123.0 Handfessel
- 101.0012.0 Narkosebogen
- 101.0111.0 Narkosebogen-
verlängerungen

Nierenoperation/ Thoraxchirurgie

- OPX mobilis L/G-Version
- 101.2590.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- 101.0352.0 Gel-Tunnelpolster
- 3x 101.0121.0 Halter
- 2x 101.0162.0 Rücken-/Gesäßstütze
- 101.0175.0 Pubisstütze
- 2x 101.0192.0 Armauflage
- 101.0177.0 Körpergurt
- 101.0012.0 Narkosebogen
- 101.0111.0 Narkosebogen-
verlängerungen

Minimalinvasive Chirurgie/ Laparoskopie

- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- 101.0019.0 Armauflage
- 101.0123.0 Handfessel
- 2x 101.0164.0 Beinfessel
- 101.0012.0 Narkosebogen
- 101.0111.0 Narkosebogen-
verlängerungen
- optional
- 2x 101.0115.0 Beinhalter nach Göpel
- 2x 101.0146.0 Spannkloben

Gefäßchirurgie

- OPX mobilis RC 40 L
ohne Gyn-Ausschnitt
- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- 2x 101.0019.0 Armauflage
- alternativ zu 101.2170.1
- 101.7154.0 Karbonplatte
- 2x 101.7152.0 Seitenschiene für Karbonplatte

Ophthalmologie

- Patientenlagerung im Reverse-Mode
L-Tischmodell ohne Gyn-Ausschnitt
- 101.2180.1 Beinplatte
- 101.0019.0 Armauflage
- 101.2780.1 Schulterplatte
- 101.0256.0 Kopfkalotte
mit Einhandverstellung
- alternativ
- 101.2720.0 Universaladapter
- 101.0256.0 Kopfkalotte
mit Einhandverstellung
- optional
- 101.6400.0 Fußbedienung
(nur für RC-Modelle)

Rektumoperation

- Variante 1 in Steinschnittlage
- 101.2580.1 Kopfplatte
- 2x 101.0115.0 Beinhalter nach Göpel
- 2x 101.0146.0 Spannkloben
- 2x 101.0019.0 Armauflage
- 101.0010.0 Schulterhalter (1 Paar)
- Variante 2 in Bauchlage
- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatten mit
Gyn-Ausschnitt
- 2x 101.0019.0 Armauflage
- 101.2070.1 Stützpolster
- 2x 101.0190.0 Seitenpolster
- 101.0178.0 Stützrolle
- 2x 101.0146.0 Spannkloben
- 101.0012.0 Narkosebogen

Neurochirurgie

- 101.2780.1 Schulterplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- in Rücken-/Bauchlage:
- 101.2720.0 Universaladapter
- 101.0113.0 Doro-Zwischenstück
- 101.0142.0 Doro-Universal-Halterung
- 101.0127.0 Doro-Skull-Clamp
- in Beach-Chair-Position:
- 101.0014.0 Befestigungsbügel
- 2x 101.0018.0 Spannkloben
- 101.0113.0 Doro-Zwischenstück
- 101.0142.0 Doro-Universal-Halterung
- 101.0127.0 Doro-Skull-Clamp
- 2x 101.0019.0 Armauflage
- alternativ: Zubehör für Kopflagerung
aus strahlendurchlässigem Material

Traumatologie

untere Gliedmaßen

- OP-Tischmodell ohne Gyn-Ausschnitt
- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.0270.0 Extensionsgerät mit
Serienzubehör
2x Extensionsholmstützen
2x Fußplatten
für Erwachsene
2x Fußmanschetten
für Erwachsene
1x Gegenzugstab
für Rückenlage
- 101.5250.0 Aufnahmevorrichtung
(Bei L-Versionen nicht
erforderlich)
- 101.0251.0 Aufnahmedorn
- 101.0491.0 Sitzplatte für Rückenlage
- 101.0324.0 Sitzplatte für Seitenlage
- 101.0350.0 Gegenzugstab
für Seitenlage
- 101.0290.0 Transportwagen
oder
- 101.0221.0 Transportwagen
- 101.0218.0 Transferbeinplatte
- 101.0019.0 Armauflage
- 101.0012.0 Narkosebogen
- 101.0137.0 Handfessel

zusätzlich: für Oberschenkelversorgung/ Schenkelhalsversorgung

- 101.0115.0 Beinhalter nach Göpel
- 101.0146.0 Spannkloben
- 101.0193.0 Seitenschienen-
verlängerung

zusätzlich: für Unterschenkelversorgung

- 101.0280.0 Unterschenkel-
lagerungsaggregat
- 101.0165.0 Kirschnerdraht-Bügel
- 101.0254.0 Kondylenfixierung
- 101.0115.0 Beinhalter nach Göpel
- 101.0146.0 Spannkloben
- 101.0193.0 Seitenschienen-
verlängerung

Traumatologie

Ober-/Unterarmversorgung

- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- 101.0136.0 Oberarm-
lagerungsaggregat
- 101.0146.0 Spannkloben
- 101.0152.0 Oberarmgegenzugstab
- 101.0146.0 Spannkloben
- 101.0163.1 Weinberger Handfessel
- in Bauchlage:
101.0122.0 Oberarmlagerungsplatte
101.0117.0 Spannkloben
- für Unterarmextension:
101.0257.0 Achselstütze
101.0258.0 Ellenbogengelenkstütze
101.0105.0 Zugaggregat
- 101.0123.0 Handfessel
- 101.0177.0 Körpergurt

Arm-/Handoperation

- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- 101.0070.1 Hand-OP-Platte
- alternativ zu 101.0070.1
101.0108.0 Hand-OP-Platte
(CFK-Lagerungsfläche)
- 101.0019.0 Armauflage
- 101.0177.0 Körpergurt
- 101.0012.0 Narkosebogen

Wirbelsäulenoperation

- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- in Bauchlage:
101.7154.0 Karbonplatte
- 2x 101.7152.0 Seitenschiene
für Karbonplatte
- in Knie-/Ellenbogenposition:
101.2070.1 Stützpolster
- 2x 101.0190.0 Seitenpolster
- 101.0178.0 Gesäßstützrolle
- 2x 101.0146.0 Spannkloben
- 101.0355.0 Gel-Kopfpolster
für Bauchlage
- 2x 101.0019.0 Armauflage
- 101.0012.0 Narkosebogen

Kniearthroskopie

- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- 101.0212.0 Knie-Arthroskopiestütze
- 101.0146.0 Spannkloben
- alternativ
101.0583.0 Knie-Arthroskopiestütze
- 101.0164.0 Beinfessel
- 101.0019.0 Armauflage
- 101.0012.0 Narkosebogen
- 101.0137.0 Handfessel

Schulterarthroskopie

- in Beach-Chair-Position:
101.0242.0 Schulterchirurgieplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- 101.0266.0 Helm für Schulter-OP
- 101.0364.0 Zwischenstück
- 2x 101.0019.0 Armauflage
- 101.0177.0 Körpergurt
- in Seitenlage:
101.0253.0 Schultertraktionssystem
- 101.0265.0 Sterile Armhalter

Adipositas-Chirurgie

- RC 40-Tischmodell
- 101.2580.1 Kopfplatte
- 101.2170.1 Beinplatte
- alternativ zu Beinplatten:
101.0219.0 Beinhalter nach Göpel
(Schwerlast)
- 2x 101.0147.0 Spannkloben
- 101.0194.0 Verbreiterungselemente
(2er Set)
- 101.0200.0 Verbreiterungselemente
(2er Set)
- 101.0455.0 Körpergurt
- 2x 101.0019.0 Armauflage
- 101.2070.1 Stützpolster
oder
- 101.0368.0 Fußplatten (Paar)
- 101.0010.0 Schulterhalter (Paar)
- 2x 101.0164.0 Beinfessel



SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

58734 Wickede (Ruhr)
Postfach 14 61
58739 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
T +49 (0)2377 84 0
F +49 (0)2377 84 162
www.schmitz-soehne.com
zentrale@schmitz-soehne.de

Export:
T +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:
T +49 (0)2377 84 550
F +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Alle mit dem CE-Zeichen
gekennzeichneten Produkte,
in Verbindung mit unserem
Zubehör, entsprechen den
Anforderungen des Medizin-
produkte-Gesetzes (MPG) und
der EG-Richtlinie 93/42/EWG.
Medizinprodukte der Klasse 1.



Zu detaillierten Zweckbestim-
mungen beachten Sie bitte auch
die Gebrauchsanweisung!



f /schmitz.soehne

Gebietsverkaufsleitung in Deutschland und Österreich:

Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen

Ricardo Herzog
M +49 (0)162 2567988
herzog@schmitz-soehne.de

Nordrhein-Westfalen

Frank Spiekermann
M +49 (0)162 2565915
spiekermann@schmitz-soehne.de

Mecklenburg- Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen

Marco Keil
M +49 (0)162 2150822
keil@schmitz-soehne.de

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg

Christina Bichler
M +49 (0)162 4013004
bichler@schmitz-soehne.de

Bayern, Österreich

Kerstin Geier
M +49 (0)1520 9077059
geier@schmitz-soehne.de

Niederlassung:

Schweiz

SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
T +41 (0)31 75565 88
F +41 (0)31 75565 89
M +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

**Informationen
zu weiteren Nieder-
lassungen weltweit
finden Sie auf unserer
Internetseite.**

Das komplette SCHMITZ-Programm


OPX mobilis® Operationstische
für Ambulanz und OP
Beispielhaft flexibel
und zuverlässig




DIAMOND
Operationstische
der Extraklasse



Gynäkologie, Urologie,
Proktologie,
Perfekt und sinnvoll eingerichtet

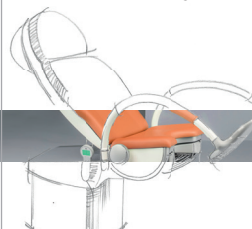


Zubehör
für DIAMOND und OPX-mobilis®
Operationstische

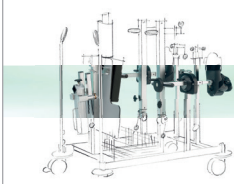


vidan2
Das Full-HD Videokolposkop



varimed® Funktionswagen -
unsere Experten
für den Klinikalltag

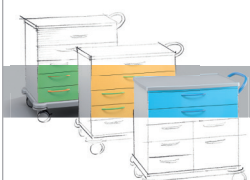

STL 285, STS 282, STX 280
Spezialtische für
Patiententransport, Notfall,
Ambulanz, Intensivpflege
und Röntgen

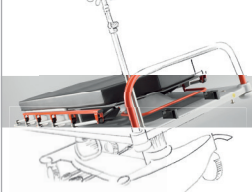

varimed®
Allgemeines medizinisches Mobiliar
für die Untersuchung
und Behandlung



varimed®
Ambulanz- und OP-Mobiliar



Partura®
Das SCHMITZ-Entbindungsbett
Komfortabel und sicher -
für eine präventive Geburtshilfe



IHR FACHBERATER:



RAMMERSTORFER
medizintechnik- & pflegetechnik handels gmbh

T: +43 7212 21195 · info@ragmed.at
www.ragmed.at

Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und
Niederlassungen. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen sind möglich.
Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. SCHMITZ-Katalog Nr. 60, 01.2019.
Schutzgebühr 3,00 Euro.