




arco-matic® – Die neue Generation gynäkologischer Untersuchungsstühle

IHR FACHBERATER:



RAMMERSTORFER
medizintechnik- & pflegetechnik handels gmbH

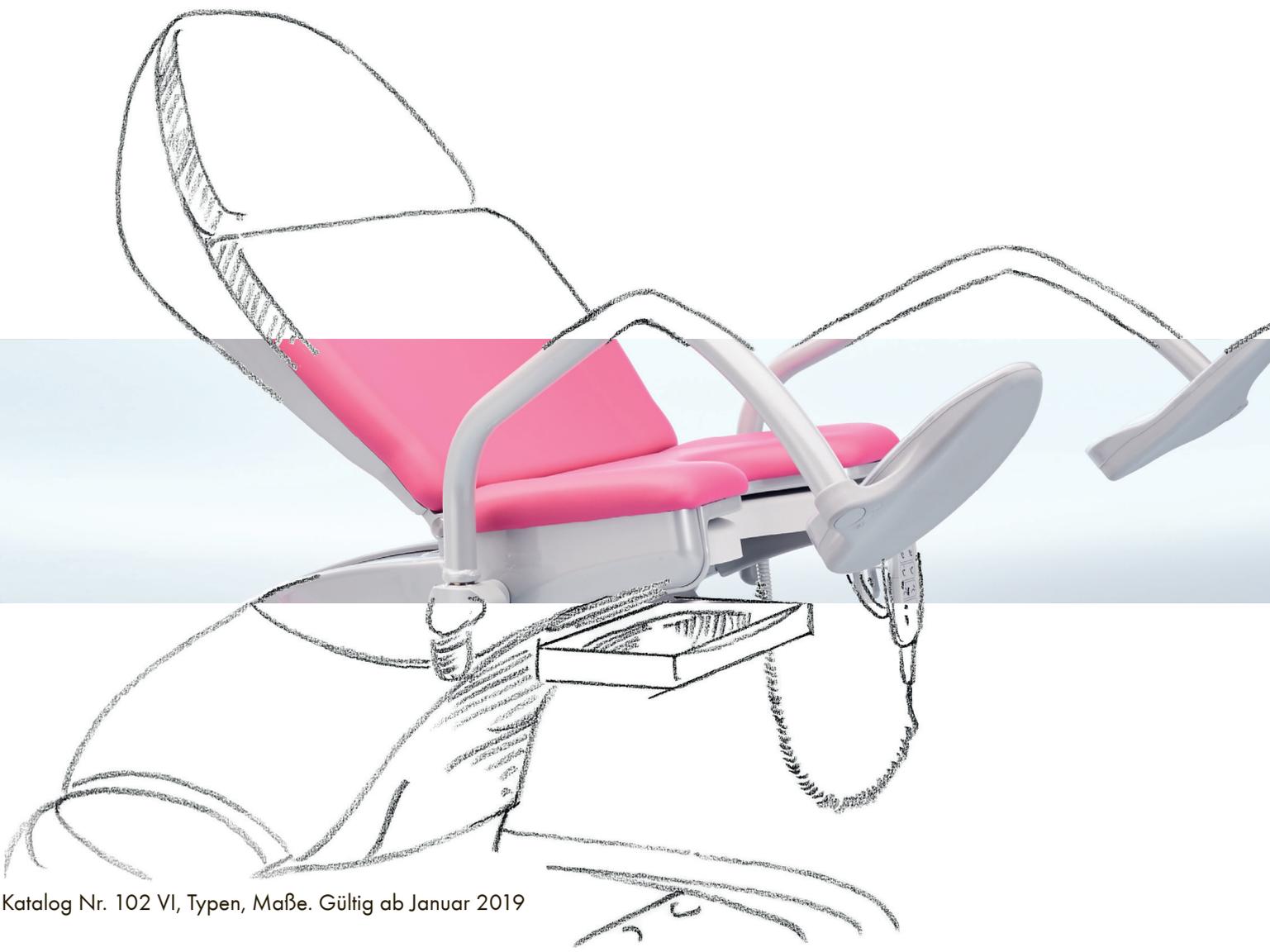

arco-matic®

Optimierte Nutzung, hoher Komfort, erstklassiges Design

arco-matic®, die neue Serie gynäkologischer Untersuchungsstühle, verbindet ausgezeichnetes Design mit modernster Technologie und einem starken Preis-/Leistungsverhältnis.

Ergonomisch

Eine Polsterbreite von bis zu 685 mm im Rückenbereich und ein individuell anpassbares Kopfpolster mit Magnetbefestigung bieten der Patientin ein angenehmes und komfortables Sitzgefühl. Mit einer Aufstiegs-höhe von nur 550 mm können auch ältere oder körperlich eingeschränkte Patienten bequem Platz nehmen, die Sitzposition bleibt auch in tiefster Stellung waagrecht.

Stark

Ausgelegt auf eine Arbeitslast von 250 kg bietet der Stuhl viel Sicherheit und Behandlungsmöglichkeiten auch für adipöse Patientinnen.

Zeitsparend

Eine optimierte Verstellgeschwindigkeit und vier frei wählbare Memorypositionen sorgen für eine rasche Einstellung in die gewünschte Position.

Funktionell

Die Rückenlehne lässt sich in eine waagerechte Position bringen, so dass eine Flachlagerung für z.B. Ultraschall, sowie im Notfall eine Schocklagerung möglich ist. Der tiefe Gynausschnitt von 155 mm bietet verbesserten Zugang zum Untersuchungsfeld. Die Sekretschale bleibt auch bei Beckenhochlagerung in der Waage.

Mobil

Verdeckte Rollen (optional) machen den Untersuchungsstuhl zu einer mobilen Einheit, für eine flexible Nutzung von Behandlungsbereich und Raumausstattung. Die Zentralfeststellung sorgt für eine schnelle und sichere Positionierung.

Hygienisch

Ebene, geschlossene Flächen und der Verzicht auf Ecken und Kanten gewährleisten optimierte hygienische Voraussetzungen und eine einfache Reinigung. Sogar der Bereich unter dem arco-matic® kann durch seine Mobilität (optional) gereinigt werden.

Made in Germany





Mit seinen vielfältigen, farblichen Auswahlmöglichkeiten und dem prämierten Design lässt der arco-matic® keine Gestaltungswünsche offen und fügt sich als optisches Highlight in den Untersuchungsraum ein.



reddot award 2017
winner

Abbildung:
114.9703.0 mit Fußstützen 1101.0539.0,
Kunstlederbezug 101.0473.0, Beinplatte 101.0542.0,
Sekretschale mit Komforthalterung 101.0495.0,
Farbblende 101.0488.0 und LED-Ambiente-
beleuchtung 101.0487.0

arco-matic® Farbe:
Polster himbeerrot 103
Kunststoffteile: silbergrau

arco-matic® mit Orbit

Das klare Einrichtungskonzept für die gynäkologische Praxis



Ob die niedrige Einstiegshöhe, die der Patientin das Platznehmen erleichtert, eine Memoryfunktion, die den Stuhl schnell in die Untersuchungsposition bringt oder der tiefe Gynausschnitt, der die Untersuchung vereinfacht – die Untersuchungsstühle der Serie arco-matic® sind auf die speziellen Anforderungen des Praxisalltags ausgerichtet.

Perfekt ergänzt wird arco-matic® durch Orbit – das modulare Ver- und Entsorgungskonzept für den gynäkologischen Arbeitsplatz, das sich jeder Einrichtungssituation anpasst. So wird arco-matic® Teil eines besonders funktionalen Einrichtungskonzepts, das in vielen attraktiven Farbvarianten erhältlich ist.

Weitere Informationen zu unserem Orbit Programm finden Sie im Katalog Nr. 75 oder auf unserer Website.



Farben in den Abbildungen:
arco-matic®:
Polster himbeerrot 103
Kunststoffteile: silbergrau

Drehhocker:
Polster himbeerrot 103

Orbit:
Körper weißaluminium RAL 9006
Front erikaviolett RAL 4003
Blendleiste erikaviolett RAL 4003
Bügelgriffe halbrund weißaluminium RAL 9006
Kunststoffteile: silbergrau

arco-matic® für die Gynäkologie CE



Beschreibung

arco-matic® 200 M 114.9602.0

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, mit Memory-Funktion für 4 Positionen, Beckenhochlagerung und Rückenteilverstellung elektromotorisch, Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm. Aktivierung der Verstellfunktionen sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung.


arco-matic® 300 M 114.9703.0

Untersuchungs- und Behandlungsstuhl, mit Memory-Funktion für 4 Positionen, Beckenhochlagerung, Rückenteilverstellung und **Fußstützen (Zubehör) elektromotorisch verstellbar**, Sitzhöhe durch Beckenhochlagerung verstellbar von 550 mm bis 1.000 mm. Aktivierung der Verstellfunktionen sowie der Memory-Funktionen über Hand- und Fußbedienung.

Achtung!
Alle Grundtypen ohne Beinlagerungssystem,
bitte wählen Sie aus 3 Möglichkeiten! (Seite 8/9)



114.9602.0 und 114.9703.0

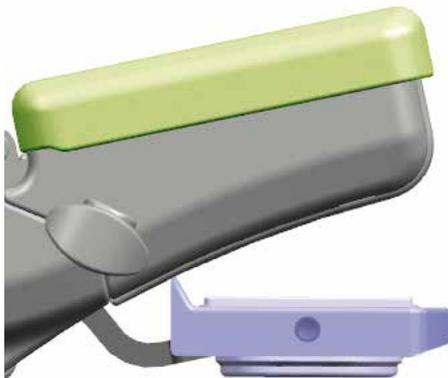

Sekretschale aus Edelstahl im Kunststoffrahmen,
in fester Positionierung pendelnd gelagert.



Hand- und Fußbedienung

- flexible Positionierung der herausnehmbaren Fußbedienung für entspanntes und bequemes Arbeiten
- Speicherung und Abrufen von bis zu 4 Memory-Positionen
- Sanfter Anlauf der Stuhlbewegungen
- Steuerung aller Bewegungsabläufe über Fuß- und Handbedienung

Serienmäßige Ausstattung:

Sitz-, Rücken- und Kopfteilepolster ergonomisch gepolstert, Sekrethschale aus Chromnickelstahl, im Kunststoffrahmen, in fester Positionierung pendelnd gelagert, herausnehmbar, 325 x 175 x 65 mm (B x L x H), 2,5 Liter Volumen. Magazin zur Aufnahme von 400 oder 500 mm breiten Papierrollen, max. Durchmesser 140 mm, Papier abrollbar über Rückenlehne und Sitzpolster oder nur über das Sitzpolster. Mit Hand- und Fußbedienung, Bodenplatte mit 4 Nivellierschrauben, Kunststoffverkleidung silber, Polsterbezug nach Farbkarte. Beinlagerungsaufnahme, hiermit können Fußstützen oder Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff schnell entnommen oder einzeln waagrecht geschwenkt werden (entfällt bei Seitenschienen).

Anschlusskabel 3 m mit Netzstecker, Anschluss: 100 - 240 V, 50/60 Hz, max. 0,94 kW.
Länderspezifische Ausführungen auf Anfrage.

Nettogewicht: ca. 96 kg
(114.9602.0)


Nettogewicht: ca. 100 kg
(114.9703.0)

Sichere Arbeitslast: 250 kg

Lackierung:

Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 9006 weißaluminium. Hochglänzende Oberfläche mit extremer Stoß- und Kratzfestigkeit. Leicht zu reinigen, desinfektionsfest und klimabeständig.

Verstellfunktionen und Maße

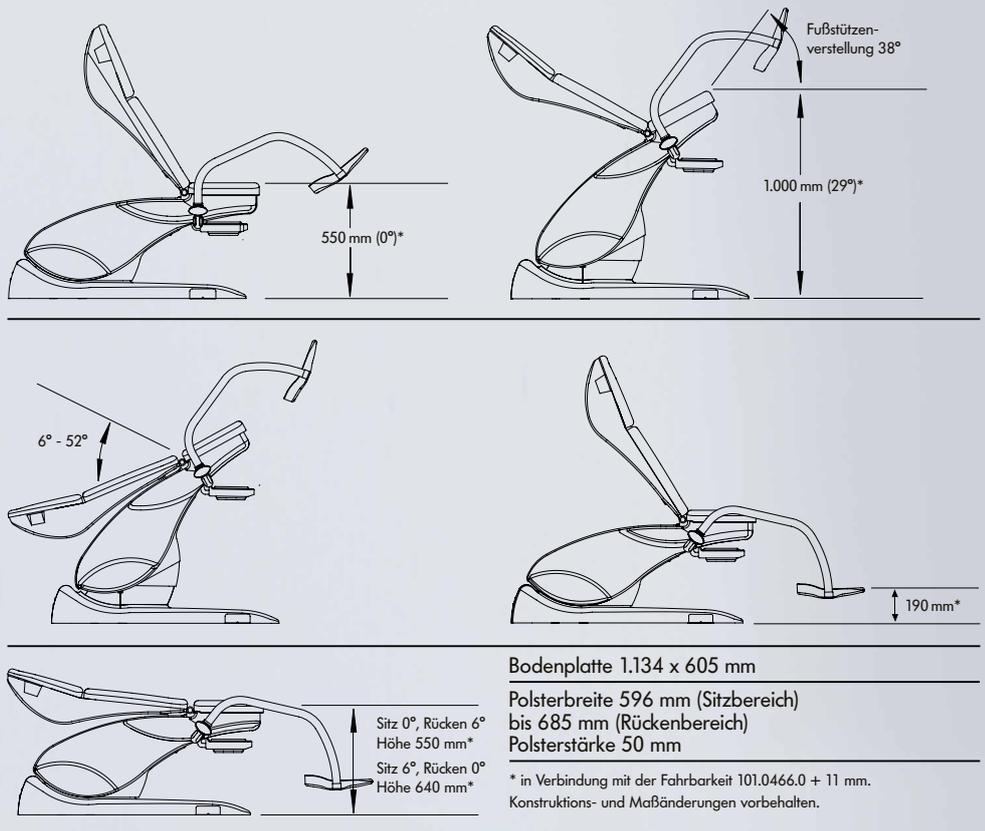

Polsterung:

Schaumstoff auf Trägerplatte, mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstlederbezug in zwei Qualitäten. Ausführung classic in 4 Farbtönen und Ausführung comfort in 18 Farbtönen.

Bestellhinweis:

Folgende Angaben sind bei der Bestellung eines Stuhles der Serie arco-matic® erforderlich: Polsterfarbe siehe Farbpalette.



Beckenhochlagerung
114.9602.0 und 114.9703.0



Rückenteilverstellung
114.9602.0 und 114.9703.0



elektrische Fußstützenverstellung
114.9703.0

arco-matic® Beinlagerungssysteme

1

Fußstützen (Paar) 101.0539.0

mit integriertem Handgriffbügel, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium, schwenk- und feststellbar. Schutzüberzüge aus durchsichtigem Kunststoff für Fußplatten.

2

Beinhalter nach Göpel mit integriertem Handgriff (Paar) 101.0493.0

mit integriertem Handgriffbügel, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium, Integralschaumpolster silbergrau, mit Festschnallgurten, Stange aus Chromnickelstahl 18/10.

3

Beinhalter nach Göpel (Stück) 101.0459.0

Integralschaumpolster in silbergrau, mit Festschnallgurt, Stange aus Chromnickelstahl 18/10, ohne Spannkloben. (Bitte Seitenschiene 101.0463.0 und Spannkloben 101.1670.0 berücksichtigen.)

Seitenschiene (Paar) 101.0463.0

für das Sitzteil, aus Chromnickelstahl 25 x 10 mm, 290 mm lang.

Spannkloben (Stück) 101.1670.0

drehbar, aus Chromnickelstahl 18/10, zur Montage auf Seitenschiene.



1

101.0539.0



2

101.0493.0



3

101.0459.0, 101.0463.0 und 101.1670.0

arco-matic® Zubehör

1
Kunstlederbezug (Paar) 101.0473.0
für Handgriffbügel der Fußstützen, mit Reißverschluss,
nach Farbkarte.

2
Kunstlederbezug (Paar) 101.0474.0
für Handgriffbügel der Beinhalter nach Göpel,
mit Reißverschluss, nach Farbkarte.

3
Kopfpolster 101.0472.1
Kunstlederbezug nach Farbkarte.

4
Schutzüberzüge (Paar) 101.0475.0
aus durchsichtigem Kunststoff, für Fußstützplatten.

5
Papierrolle 101.0489.0
500 mm breit, für integriertes Magazin.

Schutzbezug 101.0477.0
für das Sitzpolster.
(o. Abb.)

6
**Sekretschale
mit Komforthalterung 101.0495.0**
aus Edelstahl, im Kunststoffrahmen, immer in waage-
rechter Position, ausziehbar und herausnehmbar,
325 x 175 x 65 mm (B x L x H), 2,5 Liter Volumen.





7

101.0464.0



9

101.0494.0



8

101.0482.0 und 101.0481.0



10

1101.0487.0 und 101.0488.0



11

101.0469.0



12

101.0466.0

7

Seitenschiene (Stück) 101.0464.0

für das Sitzteil, aus Chromnickelstahl 25 x 10 mm, 150 mm lang.

8

2 Steckdosen 101.0482.0

gemäß EN 60601-1.

(Nachrüstung nicht möglich)

2 Steckdosen 101.0483.0

wie Steckdosen 101.0482.0, jedoch Schweizer Ausführung.

(Nachrüstung nicht möglich)

(o. Abb.)

Potentialausgleichsbuchse 101.0481.0

9

Kolposkophalterung 101.0494.0

für Systeme Leisegang, Leica, Kaps und Zeiss, rechts oder links montierbar, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Für Systeme Kaps und Zeiss, bitte Anschlussrohr mit Klemmhalter beim Kolposkophersteller mitbestellen! (ohne Kolposkop)

10

LED Ambientebeleuchtung 101.0487.0

beidseitige LED-Beleuchtung oberhalb der Farbblende, Farbauswahl mit 13 verschiedenen Farben, wechselbar über Schalter unter der Farbblende, abgestimmter Farbton voreingestellt auf die gewählte Polsterfarbe (weißes LED Licht bei braunem, schwarzem und grauem Polsterfarbton).

Farbblende 101.0488.0

farbige Blende, optisch passend zur Polsterfarbe.

11

Fußbügel für den Arzt 101.0469.0

aus Sicht des Patienten links montiert.

Fußbügel für den Arzt 101.0468.0

aus Sicht des Patienten rechts montiert.

(o. Abb.)

12

Fahrbarkeit 101.0466.0

2 Doppelrollen Ø 75 mm, 4 Bockrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, mit Zentralfeststellung. (nachrüstbar)

Hinweis:**Nicht zulässig für den Patiententransport!**

Zentralfeststellung

arco-matic® Zubehör

1

Beinplatte 101.0542.0

im Sitzrahmen integriert, herausziehbar, Auflage aus Soft-Touch-Kunststoff (TPE), grau. Sichere Arbeitslast 50 kg. Polstermaße: 480 x 30 x 373 mm (B x H x L). (auch nachrüstbar durch unseren Service – Preis auf Anfrage)

2

Armauflage 101.0019.0

bezogenes Schaumstoffpolster, elektrisch leitend, 450 mm lang, mit Festschnallgurt und Spannkloben, horizontal und vertikal verstellbar, kippbar mit Kugelgelenk, Ausführung in Chromnickelstahl.

3

Seitenschienen für Rückenteil (Paar) 101.0465.0

Chromnickelstahl, 25 x 10 mm, am Rückenteil, zur Aufnahme von Zubehör, Länge 400 mm.



Flachlagerung mit Beinplatte

101.0542.0



1

101.0542.0



2

101.0019.0



3

101.0465.0


Planungsbeispiel



Abbildung:
arco Farben:
Polster limette 99
Lackierung weißaluminium RAL 9006
Kunststoffteile: silbergrau

Untersuchungssitz Farbe:
Polster limette 99

Orbit Farben:
Körper weißaluminium RAL 9006
Front laubgrün RAL 1206050
Blendleiste laubgrün RAL 1206050
Bügelgriffe halbrund limonengrün RAL 1008060
Kunststoffteile: silbergrau

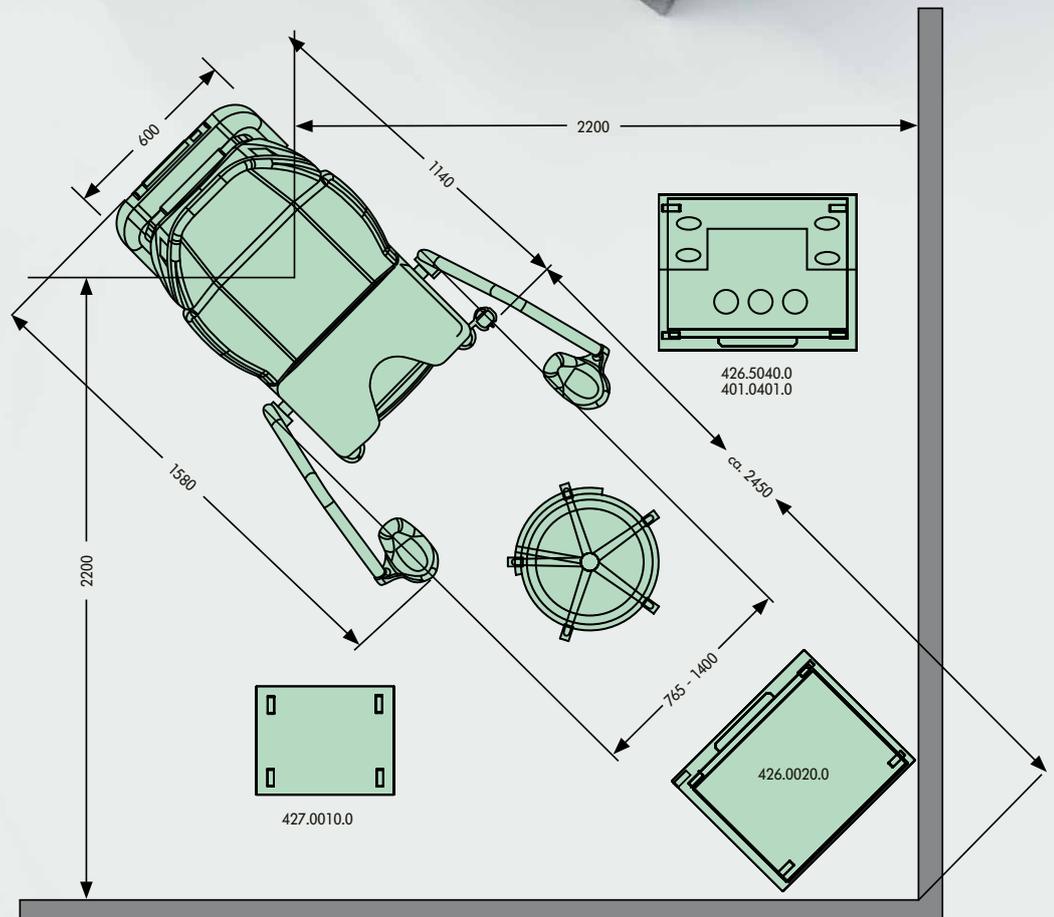


Der Online-Farbkonfigurator: Sie haben die Farbwahl



Kunstleder comfort



Kunstleder classic

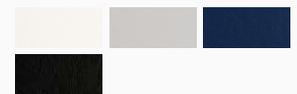

Ausgewählte Farben:

Polster:
himbeerrot 103
Kunststoffteile:
silbergrau

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben im Farbkonfigurator aufgrund verschiedenster Monitor-/Grafikkarteneinstellungen nicht farbecht sind und wir deshalb keine Gewähr übernehmen können.
Bild zeigt Modell Nr. 114.9703.0 mit Fußstützen 101.0539.0, dem Kunstlederbezug für Handgriffbügel 101.0473.0, der Beinplatte 101.0542.0, der Sekretschale mit Komforthalterung 101.0495.0 und der Farbblende 101.0488.0.

Entdecken Sie neue Farbwelten

Mit dem Online-Farbkonfigurator von SCHMITZ können Sie verschiedene Farbkombinationen ausprobieren und in Ruhe auf sich wirken lassen.


Mit insgesamt 22 Polsterfarben haben Sie viele Möglichkeiten, in Ihren Räumen Farbakzente zu setzen.

Ob gedeckt oder fröhlich, klassisch oder modern, elegant oder extravagant – bei uns finden Sie garantiert schnell den passenden Farbton.

Lassen Sie sich inspirieren:
www.schmitz-soehne.com

Farben für Kunstlederbezüge und Kunststoffe

Kunstleder comfort

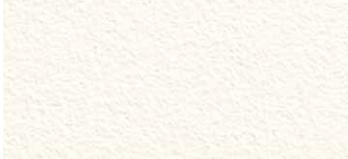

blütenweiß 84



goldgelb 86



mandarine 98



karminrot 92



himbeerrot 103



karibikblau 82



atlantikblau 83



topas 105



opalgrün 100




apfelgrün 94



limette 99



milchkaffee 102

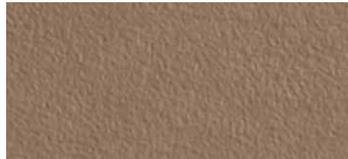

naturbraun 93



haselnuss 104



sandbeige 101



steingrau 96



schiefergrau 97



titangrau 91

Kunstleder classic




weiß 53



silbergrau 55



ozean 52

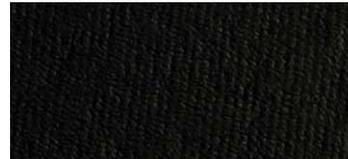

schwarz 57

Kunststoff



silbergrau

Wir empfehlen:
Spezialreiniger für Kunstleder
Artikel-Nr. 2019878
Sprühflasche mit 500 ml Inhalt
(Verpackungseinheit 3 Flaschen)

Reinigungsset Polster,
Artikel-Nr. 2026973
eine Sprühflasche mit 500 ml Inhalt
und eine Bürste

Detaillierte Informationen zur
Reinigung und Desinfektion der
Polster finden Sie in unseren
jeweiligen Gebrauchsanweisungen.



SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

58734 Wickede (Ruhr)
Postfach 14 61
58739 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
T +49 (0)2377 84 0
F +49 (0)2377 84 162
www.schmitz-soehne.com
zentrale@schmitz-soehne.de

Export:
T +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:
T +49 (0)2377 84 550
F +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Alle mit dem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Gesetzes (MPG) und der EG-Richtlinie 93/42/EWG. Medizinprodukte der Klasse 1.



Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!



f /schmitz.soehne

Gebietsverkaufsleitung in Deutschland und Österreich:

Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen

Ricardo Herzog
M +49 (0)162 2567988
herzog@schmitz-soehne.de

Nordrhein-Westfalen

Frank Spiekermann
M +49 (0)162 2565915
spiekermann@schmitz-soehne.de

Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen

Marco Keil
M +49 (0)162 2150822
keil@schmitz-soehne.de

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg

Christina Bichler
M +49 (0)162 4013004
bichler@schmitz-soehne.de

Bayern, Österreich

Kerstin Geier
M +49 (0)1520 9077059
geier@schmitz-soehne.de

Niederlassung:


Schweiz

SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
T +41 (0)31 75565 88
F +41 (0)31 75565 89
M +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

Informationen zu weiteren Niederlassungen weltweit finden Sie auf unserer Internetseite.

Das komplette SCHMITZ-Programm


OPX mobilis® Operationstische für Ambulanz und OP
Beispielhaft flexibel und zuverlässig

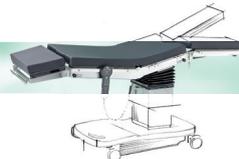


DIAMOND Operationstische der Extraklasse




Gynäkologie, Urologie, Proktologie
Perfekt und sinnvoll eingerichtet

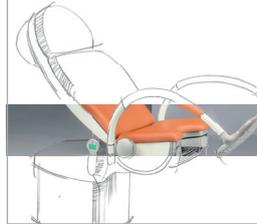


Zubehör für DIAMOND und OPX-mobilis® Operationstische

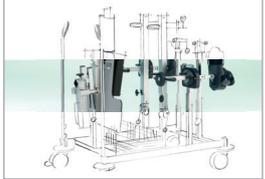


vidan2
Das Full-HD Videokolposkop

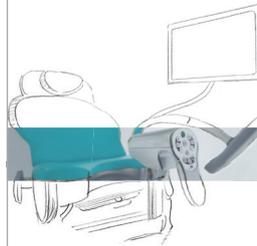

varimed® Funktionswagen - unsere Experten für den Klinikalltag

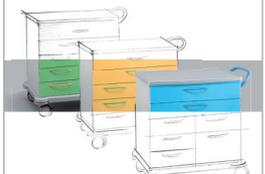

STL 285, STS 282, STX 280
Spezialtische für Patiententransport, Notfall, Ambulanz, Intensivpflege und Röntgen

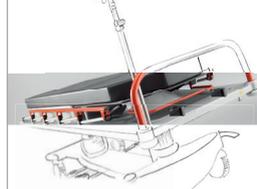

varimed® Allgemeines medizinisches Mobiliar für die Untersuchung und Behandlung



varimed® Ambulanz- und OP-Mobiliar



Partura® Das SCHMITZ-Entbindungsbett
Komfortabel und sicher für eine präventive Geburtshilfe



IHR FACHBERATER:



RAMMERSTORFER
medizintechnik- & pflegetechnik handels gmbh

T: +43 7212 21195 · info@ragmed.at
www.ragmed.at



Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und Niederlassungen. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Farbabweichungen sind möglich. Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. SCHMITZ-Katalog Nr. 102 VI, 01.2019. Schutzgebühr 3,00 Euro.